

# Skötsel och rengöring av ultraljudssystem och givare



# Innehåll

<b>1</b>	<b>Läs detta först.....</b>	<b>5</b>
	Varningssymboler.....	7
	Kundkommentarer.....	8
	Kundservice.....	8
	Användarinformationens konventioner.....	8
	Förbrukningsartiklar och tillbehör.....	9
<b>2</b>	<b>Säkerhet.....</b>	<b>11</b>
	Varningar och försiktighetsåtgärder.....	11
	Varning för latexprodukter.....	14
	Medicinsk latexvarning från FDA.....	15
	Infektionskontroll.....	16
	Överförbar spongiform encefalopati.....	18
	Givarskydd.....	18
<b>3</b>	<b>Rengöring och underhåll av systemet.....</b>	<b>21</b>
	Desinfektionsmedel och rengöringsmedel för systemytor.....	21
	Rengöra och desinfektera systemet och EKG-utrustningen.....	24
	Rengöra systemet och EKG-utrustningen.....	26
	Desinficera systemytor och EKG-utrustningen.....	27
	Systemunderhåll för Lumify.....	28
	Rengöra styrkulan.....	28
	Rengöring av systemets luftfilter.....	28
	Rengöra och desinficera AC-adaptorn.....	30
<b>4</b>	<b>Skötsel av givare.....</b>	<b>31</b>
	Metoder för givarskötsel.....	31

Skötsel av icke-TEE-givare.....	33
Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare.....	35
Riktlinjer för AR-utrustning (automatisk desinfektor).....	41
Rengöra icke-TEE-givare, kablar och kontakter.....	42
Lågnivådesinficering av icke-TEE-givare.....	45
Högnivådesinficering av icke-TEE-givare.....	47
Sterilisera icke-TEE-givare.....	50
USB-givarskötsel.....	53
Varningar och försiktighetsåtgärder för USB-givare.....	54
Rengöra USB-givare, kablar och kontakter.....	60
Lågnivådesinficering av USB-givare.....	63
Högnivådesinficering av USB-givare.....	65
Sterilisera USB-givare.....	68
TEE-givarskötsel.....	69
Varningar och försiktighetsåtgärder för TEE-givare.....	70
Riktlinjer för TEE-givare.....	78
Rengöra och desinficera TEE-givare genom nedsänkning eller användning av automatisk endoskopdesinfektor.....	81
Ultraljudsgel.....	85
<b>5 Förvaring och transport av givare.....</b>	<b>89</b>
Transportera givare.....	89
Förvaring vid transport.....	89
Daglig förvaring och långtidsförvaring.....	90
<b>6 Desinfektionsmedel för system och givare.....</b>	<b>91</b>
Om desinfektionsmedel.....	91
Faktorer som påverkar desinfektionsmedlets effekt.....	93
Välja desinfektionsmedel och rengöringslösningar.....	93

# 1 Läs detta först

Användarinformationen för din Philips-produkt beskriver den mest omfattande konfigurationen av produkten med maximalt antal alternativ och tillbehör. Vissa funktioner som beskrivs kan vara otillgängliga för din produktkonfiguration.

Givare är endast tillgängliga i länder eller regioner där de är godkända. För information om vad som gäller i din region, kontakta din lokala Philips-representant.

Ultraljudssystem och givare kräver rätt skötsel, rengöring och hantering. Adekvat skötsel innefattar inspektion, rengöring och desinficering eller sterilisering efter behov. Denna manual innehåller information och instruktioner som hjälp för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisering av ultraljudssystem och givare från Philips. Dessutom bidrar instruktionerna till att undvika skador under rengöring, desinficering, sterilisering och som kan medföra att garantin upphävs.

Informationen i denna manual gäller för följande ultraljudssystem:

- Affiniti-serien
- ClearVue-serien
- CX30
- CX50
- EPIQ-serien
- HD5
- HD6
- HD7
- HD11-serien
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq

- Xperius (distribueras av B. Braun)

Information om Philips ultraljudssystem eller givare som inte specifikt nämns i detta dokument finns i systemets *Användarmanual* som innehåller information som gäller för just ditt system och dina givare.

Läs denna manual innan du börjar rengöra eller desinficera systemet eller givarna och iakttag alla varningar och försiktighetsåtgärder. Var särskilt uppmärksam på informationen i avsnittet "Säkerhet".

En lista över desinfektionsmedel och rengöringsmedel som är kompatibla med ultraljudssystemet och givarna från Philips finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* (medföljer systemdokumentationen), eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

En lista över de givare som stöds av ditt system finns i systemets *Användarmanual* som innehåller information som gäller för just ditt system och dina givare.

För mer information:

- Ring Philips på +1 800-722-9377 i Nordamerika.
- Utanför Nordamerika kontaktar du din lokala Philips-representant.
- Besök webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Detta dokument och den information som finns i det är konfidentiell information som ägs av Philips och får inte reproduceras, kopieras som helhet eller i delar, omarbetas, ändras, visas för andra eller spridas utan skriftlig tillåtelse från Philips juridiska avdelning. Detta dokument är avsett att användas antingen av kunder och är licensierad till dem som en del av deras inköp av utrustning från Philips eller för att uppfylla lagliga åtaganden enligt FDA enligt 21 CFR 1020.30 (med eventuella tillägg) och andra lokala lagkrav. Obehörig person får inte använda detta dokument. Detta är absolut förbjudet.

Philips tillhandahåller detta dokument utan någon som helst garanti, underförstådd eller uttalad, inklusive, men inte begränsat till indirekta garantier från försäljaren och anpassning för ett särskilt ändamål.

Philips har vidtagit åtgärder för detta dokumentets noggrannhet. Philips har emellertid inget ansvar för felaktigheter eller försummelser och reserverar sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande på alla produkter i dokumentet för att förbättra pålitligheten, funktionen eller utformningen. Philips kan när som helst göra förbättringar eller ändringar i produkterna eller programmen som beskrivs i detta dokument.

Otillåten kopiering av detta dokument kan, förutom att det utgör ett copyright-intrång, minska möjligheterna för Philips att tillhandahålla korrekt och aktuell information till användarna.

”xMATRIX” är ett varumärke som tillhör Koninklijke Philips N.V.

Namn på produkter som inte kommer från Philips kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

## Varningssymboler

Systemet kan använda följande varningssymboler. För fler symboler som används i systemet, se avsnittet ”Säkerhet” i ditt systems *Användarmanual*.

### Varningssymboler

Symbol	Beskrivning
	Identifierar ett säkerhetsmeddelande.
	Farlig spänning: Visas bredvid högspänningsterminaler och anger förekomst av spänning på mer än 1 000 Vac (600 Vac i USA).
	Anger ESD-känslighet (elektrostatisk urladdning) för en anslutning som inte är testad enligt IEC 60601-1-2. Vidrör inte de barlagda stiften. Om barlagda stift vidrörs kan det leda till elektrostatisk urladdning vilket kan skada produkten.
	Anger att användaren bör läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

## Kundkommentarer

Om du har frågor om användarinformationen eller om du upptäcker ett fel i den kan du ringa Philips kundservice på +1 800-722-9377 i USA eller kontakta en lokal kundservicerepresentant för Philips om du befinner dig utanför USA.

## Kundservice

Representanter för kundservice finns tillgängliga över hela världen för att svara på frågor och tillhandahålla underhåll och service. Kontakta din lokala representant för Philips Ultrasound för att få hjälp. Du kan även kontakta ett av följande kontor för vidare kontakt med en kundservicerepresentant eller besöka vår webbsida för kontaktuppgifter:

[www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd](http://www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd)

Philips Ultrasound, Inc.

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431, USA

800-722-9377

## Användarinformationens konventioner

Produktens användarinformation använder följande typografiska konventioner för att göra det lättare att hitta och förstå information:

- Alla procedurer är numrerade och punktformen för alla delprocedurer visas med bokstäver. Du måste genomföra momenten under det avsnitt där de visas för att säkerställa ett lyckat resultat.
- Punktlister anger allmän information om en särskild funktion eller procedur. De medför ingen efterföljande procedur.
- Vänster sida av systemet är på din vänstra sida när du står framför systemet, vänd mot systemet. Framsidan av systemet är närmast dig när du handhar det.



- Givare och pennsonder hänvisas båda till som givare, om inte skillnaden är viktig för textens betydelse.

Information som är viktig för säkerheten och effektiv användning av din produkt visas i hela användarinformationen på följande sätt:

**VARNING**

Varningar markerar information som är viktig för säkerheten för handhavare och patient.

**FÖRSIKTIGHET**

Försiktighetsåtgärder belyser sätt som skulle kunna skada produkten och följaktligen upphäva garantin eller servicekontraktet eller sätt på vilket du skulle kunna förlora patient- eller systemdata.

**ANM**

Dessa meddelanden påkallar din uppmärksamhet på viktig information som hjälper dig att använda produkten mer effektivt.

## Förbrukningsartiklar och tillbehör

Information om beställning av förbrukningsartiklar och tillbehör finns i ditt systems *Användarmanual*.



## 2 Säkerhet

Läs informationen i detta avsnitt för att säkerställa säkerheten för alla personer som använder och underhåller ultraljudsutrustningen, alla patienter som deltar i undersökningar och för att säkerställa kvaliteten för systemet med tillbehör.

Säkerhetsinformation som gäller för en specifik rengörings- eller desinfektionsuppgift tas upp under proceduren för den uppgiften.

### Varningar och försiktighetsåtgärder

För maximal säkerhet vid användning av rengörings- och desinfektionsmedel ska följande varningar och försiktighetsåtgärder iakttas:



#### WARNING

Desinfektionsmedlen rekommenderas för deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen, inte för deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).



#### WARNING

Vilken desinfektionsnivå en enhet behöver beror på vilken typ av vävnad den är i kontakt med under användningen och typen av givare som används. Säkerställ att desinfektionsmedlets typ passar för givaren i fråga och givarens användningsområde. För information om desinficeringskravens nivåer, se ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31. Se även instruktioner på desinfektionsmedlets förpackning och rekommendationer från APIC (förbundet för praktiserande läkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vid sterilisering av en givare ska du se till att steriliseringsmedlets styrka och varaktighet för kontakt är lämpliga för sterilisering. Följ tillverkarens anvisningar.

**VARNING**

Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

**VARNING**

Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.

**VARNING**

För att undvika risk för elektrisk stöt ska du inte använda någon givare som har sänkts ned under den angivna nivån för rengöring och desinfektion

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte lösningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra starka rengöringsmedel på systemet, givarna eller kringutrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte Sani-Cloth AF3 eller Super Sani-Cloth för att desinficera systemet.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte glasrengöringsmedel eller produkter som innehåller blekmedel på bildskärmarna. Torka omedelbart av desinficeringsmedel eller rengöringsmedel för att förhindra ansamling av rester.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd en mikrofibertrasa – inte hushållspapper på displayskärmarna.

**FÖRSIKTIGHET**

Systemytorna och givarna tål ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du använder dessa substanser måste du torka bort dem för att förhindra permanenta skador.

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel lösningsstyrka samt djupare eller mer långvarig nedsänkning än vad som rekommenderas kan skada eller missfärga givaren. Givarens garanti blir därtill ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av isopropylalkohol (tvättsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På givare med USB-anslutningar är de enda delarna som kan rengöras med alkohol givarhöljet och linsen (det akustiska fönstret). På givare som inte är TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och givarhöljet och linsen. På TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och kontrollhöljet. Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Vissa rengöringsmedel och desinfektionsmedel kan ge upphov till missfärgningar om rester av desinfektionsmedlet och gelen inte har tagits bort helt mellan varje användning. All gel måste alltid avlägsnas fullständigt innan rengöringsmedel och desinfektionsmedel används. Om det är kompatibelt kan en lösning med 70 % isopropylalkohol användas vid behov för att avlägsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester på systemkomponenterna. Om det är kompatibelt kan en lösning med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol användas vid behov för att avlägsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester på vissa givarkomponenter.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte självhäftande film som Tegaderm på givarlinsen. Användning av sådan film kan skada linsen.

## Varning för latexprodukter

Philips ultraljudssystem och givare har inga kontaktytor med rågummilates.

**VARNING**

Givarskydden kan innehålla rågummilatem, vilket kan framkalla allergier hos vissa personer.

**VARNING**

Remmen till M2203A-bitskyddet innehåller rågummilatem, som kan orsaka allergiska reaktioner.

## Medicinsk latexvarning från FDA

### 29 mars 1991, Allergiska reaktioner mot medicinska enheter med latexinnehåll

FDA rekommenderar att sjukvårdspersonal identifierar latexkänsliga patienter och har beredskap att omedelbart behandla allergiska reaktioner, eftersom allvarliga allergiska reaktioner mot medicinska produkter som innehåller latex (rågummi) har rapporterats. Patientreaktioner mot latex skiftar från nässelfeber till systemisk anafylaxi. Latex ingår i många medicinska enheter såsom kirurgihandskar och undersökningshandskar, katetrar, intubationsrör, anestesimasker och kofferdamdukar.

Rapporterna till FDA om allergiska reaktioner mot latexinnehållande medicinska produkter har ökat på senare tid. En viss typ av latextäckta lavemangsändar återkallades nyligen sedan flera patienter dött av anafylaktiska reaktioner under bariumlavemangbehandling. Ytterligare rapporter angående latexkänslighet finns i medicinsk litteratur. Ökad latexexponering, både från medicinska produkter och från andra konsumentprodukter, kan vara en av anledningarna till att latexkänslighet förefaller bli vanligare. Det har t ex rapporterats att 6 - 7 % av kirurgisk personal och 18 - 40 % av spina bifida-patienter är latexkänsliga.

Protein i själva latexen verkar vara den främsta källan till allergiska reaktioner. Det är inte känt hur mycket protein som krävs för att framkalla en allergisk reaktion, men FDA samarbetar med tillverkare av latexinnehållande medicinska produkter, för att göra proteinnivån i dessa produkter så låg som möjligt.

FDA:s rekommendationer till sjukvårdspersonal angående detta problem är följande:

- Vid patientens anamnes bör patienten tillfrågas även om latexkänslighet. Denna rekommendation gäller särskilt kirurgiska och radiologipatienter, spina bifida-patienter och sjukvårdspersonal. Frågor angående klåda, utslag eller andningsbesvär i samband med användning av latexhandskar eller uppblåsning av ballonger bör också ställas. Om patienten tidigare haft besvär skall detta noteras i journalen.
- Om latexkänslighet misstänks kan användning av alternativa material, t ex plast övervägas. Personal kan t.ex. ha en latexfri handske över latexhandsken om patienten är överkänslig. Om både personal och patient är överkänsliga kan tre handskar, varav den mellersta är av latex, användas. (Latexhandskar med märkningen "Icke allergiframkallande" förhindrar inte alltid skadliga reaktioner.)
- Var beredd på en eventuell allergisk reaktion, när latexinnehållande medicinska enheter används och särskilt när latex kommer i kontakt med slemhinnor.
- Om en allergisk reaktion framkallas med latex som misstänkt orsak, bör patienten meddelas om risken för latexkänslighet och en immunologisk undersökning övervägas.
- Tala om för patienten att denne före medicinska ingrepp bör berätta för läkare och vårdpersonal om varje känd latexkänslighet. Patienter med grav överkänslighet mot latex kan uppmanas att ha på sig ett medicinskt ID-armband.

FDA uppmanar läkare och vårdpersonal att rapportera om allvarliga reaktioner mot latex eller andra material som används i medicinsk utrustning. (Se FDA Drug Bulletin från oktober 1990.) Rapportera en incident genom att kontakta FDA Problem Reporting Program, MedWatch, på +1-800-332-1088 eller på Internet:

[www.fda.gov/Safety/MedWatch/](http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/)

För att få en kopia av en referenslista angående latexkänslighet kan du skriva till: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.

## Infektionskontroll

Det finns problem som är relaterade till infektionskontroll för både handhavaren och patienten. Följ de procedurer för infektionskontroll som kliniken eller sjukhuset fastställt för skydd av både personal och patienter.



### Hantera kontaminerade givare

Det viktigaste området är hanteringen av givare som kommer i kontakt med smittade patienter. Använd alltid skyddshandskar när du hanterar givare som används vid TEE-, endokavitets-, biopsiprocedurer och intraoperativa procedurer. Information om rengöring och desinfektion av givare finns i avsnittet "[Skötsel av givare](#)".

### Avlägsna blod och smittsamt material från systemet



#### VARNING

Om systemet blir internt förorenat av kroppsvätskor som innehåller patogener måste du omedelbart kontakta kundtjänst hos Philips Ultrasound. Systemets interna komponenter kan inte desinfekteras. I ett sådant fall måste systemet bortskaffas som smittsamt material enligt lokala och nationella bestämmelser.



#### FÖRSIKTIGHET

Användning av isopropylalkohol (tvättspirit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På givare med USB-anslutningar är de enda delarna som kan rengöras med alkohol givarhöljet och linsen (det akustiska fönstret). På givare som inte är TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och givarhöljet och linsen. På TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och kontrollhöljet. Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

Avlägsna blod på systemets och givarens anslutningar och kablar med gasväv fuktad med tvål och vatten. Torka sedan utrustningen med en mjuk, torr och luddfri duk för att förhindra korrosion. Du kan använda en lösning med 70 % isopropylalkohol (tvättspirit) endast på vissa delar av systemet. Kompatibla systemkomponenter anges under "[Desinfektionsmedel och](#)

rengöringsmedel för systemtor” på sid 21. Du kan använda en lösning med 91 % isopropylalkohol (tvättspit) eller en lösning med 85 % denaturerad etylalkohol endast på vissa delar av givarna. Mer information finns i avsnittet om respektive givartyp. Det finns även andra rengöringsmedel. För mer information, se *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*. Närmare information om hur blod och annat infekterat material avlägsnas från systemet finns i avsnittet *”Rengöring och underhåll av systemet”*.

### EKG-kablar och elektrodset

Information om rengöring av EKG-kablar och elektrodset finns i avsnittet *”Rengöring och underhåll av systemet”*.

## Överförbar spongiform encefalopati



### VARNING

Det kan hända att ett sterilt givarskydd blir skadat under en intraoperativ tillämpning på en patient med överförbar spongiform encefalopati, som t ex Creutzfeldt Jakobs syndrom. Du följer då riktlinjerna från CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet) och detta dokument från Världshälsoorganisationen: WHO/CDS/ APH/2000/3, WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Givarna för systemet kan inte dekontamineras genom upphettning.

## Givarskydd

För att förhindra kontamination av blodburna patogener ska sterila givarskydd användas för nålstyrningsprocedurer. Philips och B.Braun rekommenderar användning av kvalificerade skydd. Se medföljande instruktioner för information om procedurer vid användning av givarskydd.

**VARNING**

Latex och talk används vanligen i givarskydd som marknadsförs för att underlätta infektionskontroll vid transesofageala och intraoperativa avbildningsapplikationer samt applikationer för inre håligheter och under nålstyrning och biopsier. Sök på förpackningen efter latex- och talkinnehåll. Studier har visat att patienter kan få allergiska reaktioner av rågummilates. Ytterligare upplysningar finns i FDA Medical Alert från 29 mars 1991 som återges i avsnittet "[Medicinsk latexvarning från FDA](#)" på sid 15.

**VARNING**

I intraoperativa tillämpningar bör steriliserade givare användas i kombination med steril gel och ett sterilt, pyrogenfritt givarskydd.

**VARNING**

Inspektera givarskydden före och efter användning.

**VARNING**

Applicera inte givarskyddet förrän du är redo att utföra proceduren.

**VARNING**

Om ett monterat givarskydd går sönder eller förorenas före användningen ska givaren rengöras och desinficeras och ett nytt, sterilt skydd monteras.



**VARNING**

**Sterila givarskydd är engångsartiklar och får inte återanvändas.**

### 3 Rengöring och underhåll av systemet

Underhåll bör utföras regelbundet och vid behov.

Eftersom systemet är en del i en medicinsk utrustning som innehåller flera kretskort, omfattande servicediagnostik och komplex programvara rekommenderar Philips att endast utbildad personal får utföra service på systemet.

Det är viktigt att rengöra och underhålla ultraljudssystemet och kringutrustning. Det är viktigt att rengöra kringutrustningen noggrant eftersom de innehåller elektromekaniska enheter. Om de utsätts för konstant och kraftigt damm och fuktighet i miljön skadas både enheternas prestanda och pålitlighet.

Det är viktigt att rengöra de givare som används med ditt ultraljudssystem.

Rengöringsprocedurerna varierar för olika givartyper och vad de används till. Detaljerad information om hur du rengör och underhåller varje givartyp som används med systemet finns i ["Skötsel av givare"](#). Ytterligare systemspecifika anvisningar för hur du rengör och underhåller systemet finns i systemets *Användarmanual*.



#### **VARNING**

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**



#### **FÖRSIKTIGHET**

**Följ alla instruktioner som medföljer för att undvika skador under rengöring, desinficering och sterilisering. Om du inte gör det kan garantin upphävas.**

### Desinfektionsmedel och rengöringsmedel för systemmytor

Den här informationen gäller alla system utom Lumify, som behandlas under ["Systemunderhåll för Lumify"](#) på sid 28.

Desinfektionsmedlets och rengöringsmedlets kompatibilitet beror på vilken komponent de används på. Produkterna i följande tabell är kompatibla med dessa systemytor:

- EKG-stamkablar, avledningar och elektroder
- Externa plastytor och målade ytor på systemet och vagnen
- Systemets kontrollpanel
- Pekskärmar och monitorskärmar
- Kabelsamlare med klämma för givare

Rengöringslösningar för alla ytor	Rengöringslösningar för pekskärmar och monitorskärmar	Desinficeringsmedel för systemytor och pekskärmar
Mild tvållösning <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mild tvållösning<sup>1</sup></li> <li>• Rengöringsprodukter avsedda för LCD- eller OLED-skärmar</li> <li>• Renat vatten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 % isopropylalkohol (IPA)</li> <li>• Opti-Cide3 (QUAT/IPA-baserat)</li> <li>• Oxivir Tb (accelererad väteperoxid-baserat)</li> <li>• PI-Spray II (QUAT-baserad)</li> <li>• Protex spray eller servett (enbart kompatibel med EPIQ- och Affiniti-serierna samt Xperius-system)</li> <li>• Sani-Cloth HB (QUAT-baserad)</li> <li>• Sani-Cloth Plus (QUAT/IPA-baserad)</li> </ul>

1. Milda tvållösningar innehåller inte några skarpa ingredienser och är inte irriterande mot huden. De får inte innehålla någon parfym, olja eller alkohol. Handsprit är inte godkänt för användning.



### FÖRSIKTIGHET

Använd inte lösningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra starka rengöringsmedel på systemet, givarna eller kringutrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte Sani-Cloth AF3 eller Super Sani-Cloth för att desinficera systemet.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte glasrengöringsmedel eller produkter som innehåller blekmedel på bildskärmarna. Torka omedelbart av desinficeringsmedel eller rengöringsmedel för att förhindra ansamling av rester.

**FÖRSIKTIGHET**

Spill eller spraya inte vätska i några systemskarvar, portar eller givarens anslutningsuttag.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd en mikrofibertrasa – inte hushållspapper på displayskärmarna.

**FÖRSIKTIGHET**

Systemytorna och givarna tål ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du använder dessa substanser måste du torka bort dem för att förhindra permanenta skador.

Närmare information om desinfektionsmedel för systemet och givarna finns i avsnittet ["Desinfektionsmedel för system och givare"](#).

Instruktioner för rengöring och desinfektion av ultraljudssystem och givare finns i avsnittet ["Skötsel av givare"](#).

## Rengöra och desinfektera systemet och EKG-utrustningen

Den här informationen gäller alla system utom Lumify, som behandlas under ["Systemunderhåll för Lumify"](#) på sid 28.

Systemets kontrollpanel och andra ytor är alltid utsatta för spill från vätskor och andra material, t.ex. stora mängder gel. Dessa material kan tränga in i elektroniska komponenter under panelen och orsaka återkommande systemfel. Vid preventivt underhåll kontrollerar du om det finns några potentiella problem, t.ex. lösa rattar eller slitna reglage.



### VARNING

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.



### VARNING

Systemet innehåller hög spänning och kan ge elstötar i samband med underhåll. Undvik risken för farliga elstötar genom att alltid stänga av systemet och koppla från strömkabeln från vägguttaget och vänta minst 30 minuter innan du rengör systemet.



### FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att alla bromsar är låsta innan du utför underhåll eller rengöring.



### FÖRSIKTIGHET

Använd endast kompatibla rengörings- och desinfektionsmedel på systemytorna. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.





**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte lösningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra starka rengöringsmedel på systemet, givarna eller kringutrustning.



**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte glasrengöringsmedel, Dispatch-sprej eller produkter som innehåller blekmedel eller alkohol på bildskärmarna. Upprepad användning av sådana rengöringsmedel eller produkter kan skada bildskärmen och pekskärmsytorna. Använd ett rengöringsmedel som är särskilt avsett för LCD-skärmar.



**FÖRSIKTIGHET**

Använd en mikrofibertrasa – inte hushållspapper på displayskärmar.



**FÖRSIKTIGHET**

Vidrör inte bildskärmen eller pekskärmen med vassa objekt som pennor eller passare så förhindrar du att repa dem. Var försiktig så att du inte repar bildskärmar under rengöringen.



**FÖRSIKTIGHET**

Var försiktig så att det under rengöringen inte kommer in någon rengöringslösning i systemets kontrollpanel, bildskärm eller tangentbord. Du får inte spilla eller spruta vätskor på reglagen, i systemhöljet eller i givarens anslutningsuttag.

**FÖRSIKTIGHET**

Spruta inte desinficeringsmedel direkt på systemytorna. När du torkar får inte desinficeringsmedlet samlas i pölar eller rinna på systemytorna. Då kan desinficeringsmedel läcka in i systemet vilket skadar det och upphäver garantin. Torka enbart med en duk eller en applikator som är lätt fuktad.

**FÖRSIKTIGHET**

Systemytorna och givarna tål ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du använder dessa substanser måste du torka bort dem för att förhindra permanenta skador.

## Rengöra systemet och EKG-utrustningen

Den här informationen gäller alla system utom Lumify, som behandlas under ["Systemunderhåll för Lumify"](#) på sid 28.

1. Före rengöring stänger du av systemet och kopplar bort strömsladden från strömuttaget. Kontrollera även att systemets bromsar är låsta.
2. Så här rengör du bildskärmarna:
  - a. Torka av damm med en mjuk, luddfri duk. Philips rekommenderar användning av en microfiberduk.
  - b. Använd ett flytande skärmrengöringsmedel som är särskilt avsett för LCD-skärmar. Spraya medlet på rengöringsduken och torka ren skärmen. Du kan också använda särskilda skärmsavetter.
  - c. Torka av skärmen med en mjuk fiberfri duk.
3. Rengör kontrollpanelen genom att avlägsna alla fasta partiklar runt tangenter eller reglage med en bomullstopp eller tandsticka och se till att materialet inte tränger in i höljet. Torka med en mjuk duk som är fuktad med tvål och vatten.
4. Torka av övriga yttre ytor och vagnen med en mjuk trasa som fuktats med tvål och vatten:
  - Plastytor och målade ytor

- EKG-stamkablar, avledningar och elektroder

Du kan använda 70 % isopropylalkohol på envisa fläckar eller bläck och sedan tvätta med tvål och vatten.

5. Torka bort eventuella rester med en mjuk trasa, fuktad med renat vatten.
6. Torka av utrustningen för att förhindra korrosion.

Om utrustningen varit i kontakt med blod eller smittoämnen, se ["Desinficera systemytor och EKG-utrustningen" på sid 27](#) och ["Infektionskontroll" på sid 16](#).

## Desinficera systemytor och EKG-utrustningen

Före desinficering av systemet och EKG-utrustningen, läs ["Desinfektionsmedel och rengöringsmedel för systemytor" på sid 21](#).

Den här informationen gäller alla system utom Lumify, som behandlas under ["Systemunderhåll för Lumify" på sid 28](#).

1. Före rengöring och desinfektion stänger du av systemet och kopplar bort nätsladden från strömuttaget och kontrollerar att systemets bromsar är låsta.
2. Rengör systemet enligt procedurerna i avsnittet ["Rengöra systemet och EKG-utrustningen" på sid 26](#).
3. Välj ett desinfektionsmedel som är kompatibelt med systemet och följ instruktionerna på etiketten om beredning, temperatur och lösningsstyrka. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.
4. Torka systemytorna med desinficeringsmedlet och följ instruktionerna som medföljer desinficeringsmedlet om varaktighet för avtorkningen, styrka för lösningen och varaktighet för kontakt med desinficeringsmedlet. Använd rätt lösningsstyrka och varaktighet. Se till att tiden då lösningen kommer i kontakt med enheten är lämplig för den avsedda kliniska tillämpningen.
5. Torka av utrustningen för att förhindra korrosion.

## Systemunderhåll för Lumify

Du ansvarar för att rengöra och desinficera din Lumify-kompatibla enhet på korrekt sätt i enlighet med tillverkarens anvisningar och institutionens policyer för rengöring och desinficering av medicinska produkter.



### VARNING

**Om den Lumify-kompatibla enheten kontamineras inuti av kroppsvätskor som innehåller patogener måste du omedelbart kontakta en servicerepresentant för Philips. Enhetens interna komponenter kan inte desinficeras. I ett sådant fall måste enheten kasseras som smittsamt material enligt lokala och nationella bestämmelser.**

## Rengöra styrkulan

Regelbunden rengöring av styrkulan förlänger dess livslängd och gör att du slipper ringa till service.

1. Skruva bort ringen runt styrkulan med fingret.
2. Sätt tillbaka kulan i monteringsområdet.
3. Rengör styrkulan och monteringsområdet med en dammfri duk eller en liten borste.
4. Sätt tillbaka kulan i monteringsområdet.
5. Skruva på ringen med fingret.

## Rengöring av systemets luftfilter

Luftfiltret i systemet ska inspekteras varje vecka och rengöras vid behov. Om du bestämmer dig för att rengöra luftfiltret med tvål och vatten kanske du vill installera ett extra filter medan det andra filtret torkar. Du kan beställa ytterligare luftfilter genom att kontakta Philips på +1 800-722-9377 (Nordamerika) eller en lokal representant för Philips (utanför Nordamerika).

**VARNING**

Stäng alltid av systemet och dra ut nätsladden ur vägguttaget innan du genomför underhåll eller rengöring.

**FÖRSIKTIGHET**

Stäng av strömmen innan du tar ut luftfiltren. Slå inte på strömmen igen förrän du har monterat luftfiltret i enheten.

**FÖRSIKTIGHET**

Kontrollera att luftfiltret är torrt innan du installerar det. Om du installerar ett vått eller fuktigt luftfilter kan det skada systemet.

**FÖRSIKTIGHET**

Kontrollera att systemets bromsar är låsta innan du rengör luftfiltret.

1. Leta upp luftfilterhandtaget.
2. Dra luftfilterhandtaget rakt utåt tills filtret är helt avlägsnat från systemet.
3. Inspektera filtret. Beroende på luftfiltrets skick kan du damsuga eller skölja av filtret med vatten för att rengöra det. Om filtret är utslitet eller inte går att rengöra ska du byta ut det.
4. Sätt tillbaka filtret genom att skjuta filtret på plats.
5. För ytterligare systemspecifika procedurer, t.ex. återställa filtrets underhållsstatus, se ditt systems *Användarmanual*.

## Rengöra och desinficera AC-adaptorn



### FÖRSIKTIGHET

Sänk inte ner AC-adaptorn.



### FÖRSIKTIGHET

Håll fukt och vätska borta från AC-adaptorn **Spill eller spraya inte vätska på adaptorn.**

1. Före rengöring av AC-adaptorn kopplar du bort den från systemet och vägguttaget.
2. Torka AC-adaptorn med en torr trasa. Om du måste ta bort fläckar torkar du den med en duk fuktad med tvållösning och vatten.
3. Avlägsna allt fast material med en bomullstopp eller tandsticka och se till att materialet inte tränger in i adaptorn.
4. Om du måste desinficera den torkar du den med alkoholfuktad handdukspapper eller duk.
5. Torka AC-adaptorn med en torr trasa tills den är helt torr innan du ansluter den till systemet eller vägguttaget.

## 4 Skötsel av givare

Alla givare från Philips kräver rätt skötsel, rengöring och hantering. Detta avsnitt innehåller information och instruktioner som hjälp för effektiv rengöring, desinficering och sterilisering av givare som är kompatibla med Philips-ultraljudssystemet. Dessutom bidrar instruktionerna till att undvika skador under rengöring, desinficering, sterilisering och som kan medföra att garantin upphävs.

Adekvat skötsel innefattar inspektion, rengöring och desinficering eller sterilisering efter behov. Givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. Låt inte kontaminanter torka in på givaren. Du kan reducera mängden intorkade kontaminanter genom att använda en enzymrengöringssprej.

Inspektera alla delar av givaren noggrant före varje användning. Kontrollera om det finns sprickor eller annan skada som äventyrar givarens funktion. Rapportera alla skador till din kundrepresentant för Philips och ta givaren ur bruk.

Information om vilka geler som är kompatibla med systemets givare finns i avsnittet ["Ultraljudsgel"](#) på sid 85.

### Metoder för givarskötsel

För att kunna välja en lämplig metod för skötsel av givaren måste du först fastställa givarens klassificering, baserat på dess användning. Givarens skötselmetod avgör vilket desinfektionsmedel som är lämpligt för givaren. Närmare information om kompatibla desinfektionsmedel finns i avsnittet ["Desinfektionsmedel för system och givare"](#). Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder rengörings- och desinfektionsmedel.

#### ANM

Philips rekommenderar att du använder samma typ av rengöring, desinficering och sterilisering mellan användningarna oavsett om nästa användning sker på samma patient eller en annan patient.

## Skötselmetoder efter givartyp

Användning av icke-TEE-givare	Exempel	Klassificering	Skötselmetod
Kontakt med intakt hud	Krökta, linjära, xMATRIX och sektorgivare	Ej kritisk	Lågnivådesinficering (se <a href="#">"Lågnivådesinficering av icke-TEE-givare"</a> på sid 45)
Kontakt med slemhinnor	Inre håligheter	Semikritisk	Högnivådesinficering (se <a href="#">"Högnivådesinficering av icke-TEE-givare"</a> på sid 47) <sup>1</sup>
Förs in i vävnad som annars är steril	Intraoperativ och laparoskopisk användning	Kritisk	Högnivådesinficering eller sterilisering (se <a href="#">"Högnivådesinficering av icke-TEE-givare"</a> på sid 47 eller <a href="#">"Sterilisera icke-TEE-givare"</a> på sid 50) <sup>1</sup>
USB-givaranvändning	Exempel	Klassificering	Skötselmetod
Kontakt med intakt hud	Krökta givare, linjära givare och sektorgivare med USB	Ej kritisk	Lågnivådesinficering (se <a href="#">"Lågnivådesinficering av USB-givare"</a> på sid 63)
Har kontakt med steril vävnad	Krökta givare, linjära givare och sektorgivare med USB	Semikritisk	Högnivådesinfektion eller sterilisering (se <a href="#">"Högnivådesinficering av USB-givare"</a> på sid 65 eller <a href="#">"Sterilisera USB-givare"</a> på sid 68) <sup>1</sup>




TEE-givaranvändning	Exempel	Klassificering	Skötselmetod
Kontakt med slemhinnor	Transesofageala (TEE)	Semikritisk	Högnivådesinficering eller sterilisering (se <a href="#">"Högnivådesinficering och sterilisering av TEE-givare (flexibelt skaft och distal spets)"</a> på sid 84) <sup>1</sup>

- Hög desinficeringsnivå och användning av ett sterilt gel samt ett sterilt givarskydd (på det sätt som beskrivs i de instruktioner som medföljer givarskyddet) är en accepterad metod för infektionskontroll på ultraljudsgivare. Se dokumentet med riktlinjer från FDA "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers" som uppdaterats den 9 september 2008, som finns på följande webbsida:  
[www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM070911.pdf](http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM070911.pdf)

## Skötsel av icke-TEE-givare

Den här informationen gäller alla icke-TEE-givare utom dem som har USB-kontakt. Instruktioner för USB-givare finns i avsnittet ["USB-givarskötsel"](#) på sid 53.

Följande ämnen beskriver rengöring, desinficering och sterilisering av icke-TEE-givare. Information om lämplig metod för skötsel av givaren finns i avsnittet ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31. Följande figur identifierar komponenterna i icke-TEE-givare.

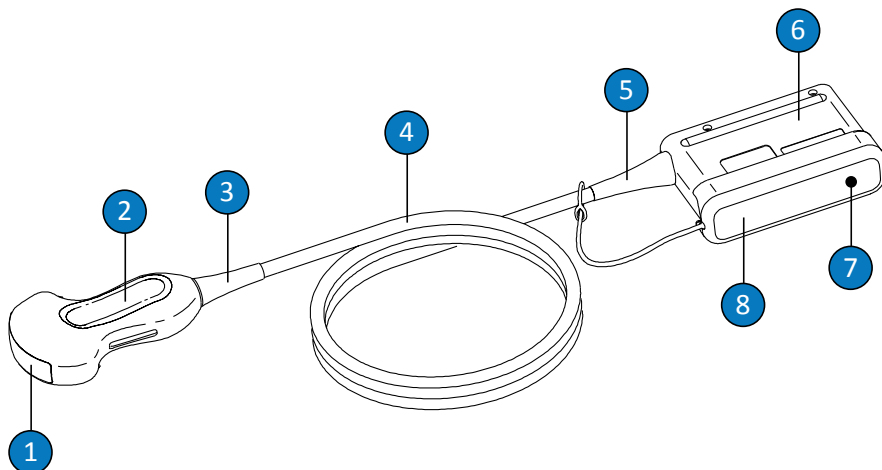

## Icke-TEE-givarnas delar

1	Givarens lins (akustiskt fönster)
2	Givarens hölje
3	Givarens avlastare
4	Kabel
5	Kontaktens avlastare
6	Kontaktens hölje
7	Kontaktens elektriska anslutningar (under höljet)
8	Skydd för kontaktstift (valfritt)

## Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare

laktta följande varningar och försiktighetsanmärkningar under all rengöring, desinficering och sterilisering vid användning av desinfektionsmedel. Specifika varningar och försiktighetsanmärkningar finns i procedurerna för skötsel och rengöring och på rengörings- och desinfektionsmedlens etiketter.



### **VARNING**

**Givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. För att desinficeringen eller steriliseringen skall ha effekt är det viktigt att givaren är rengjord. Följ tillverkarens anvisningar när du använder desinfektionsmedel.**



### **VARNING**

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**



### **VARNING**

**Sterila givarskydd med sterilt ultraljudsgel krävs under intraoperativa procedurer och biopsiundersökningar. Givarskydd rekommenderas för transrektala och intravaginala procedurer. Skydden är obligatoriska i Kina och Japan. Philips rekommenderar användning av kvalificerade skydd.**



### **VARNING**

**Sterila givarskydd är engångsartiklar och får inte återanvändas.**

**VARNING**

Vid intraoperativ tillämpning (utom TEE eller endoskopi) kan man på givare som används med steril gel och sterila givarskydd använda antingen metoden för högnivådesinficering eller -sterilisering.

**VARNING**

Desinfektionsmedlen rekommenderas för deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen, inte för deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vilken desinfektionsnivå en enhet behöver beror på vilken typ av vävnad den är i kontakt med under användningen och typen av givare som används. Säkerställ att desinfektionsmedlets typ passar för givaren i fråga och givarens användningsområde. För information om desinficeringskravens nivåer, se ["Metoder för givarskötsel" på sid 31](#). Se även instruktioner på desinfektionsmedlets förpackning och rekommendationer från APIC (förbundet för praktiserande läkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vid sterilisering av en givare ska du se till att steriliseringsmedlets styrka och varaktighet för kontakt är lämpliga för sterilisering. Följ tillverkarens anvisningar.

**VARNING**

Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

**VARNING**


Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel lösningsstyrka samt djupare eller mer långvarig nedsänkning än vad som rekommenderas kan skada eller missfärga givaren. Givarens garanti blir därtill ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av isopropylalkohol (tvättspirit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På givare som inte är TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och givarhöljet samt linsen (det akustiska fönstret). Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Rengör inte någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar eller kabelavlastare), eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

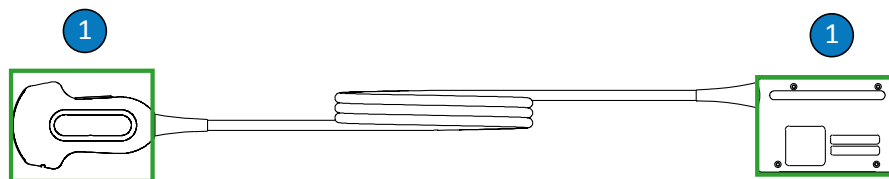

#### Alkoholkompatibla delar på icke-TEE-givare

- 1 De enda delar som kan rengöras med lösningar med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol är kontakthöljet och givarhöljet samt lens. Se till att ingen vätska kommer in i något oförseglat område av givaren. Rengör linsens yta med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. Linsen kan skadas om du torkar eller skrubbar för hårt.



#### FÖRSIKTIGHET

Vid användning av ett enzymatiskt rengöringsmedel ska du säkerställa att du använder rätt koncentration och skölja noga. Enzymrengöringsmedel är allmänt kompatibla för användning.



#### FÖRSIKTIGHET

Rengöring eller desinficering av en givare, kabel eller ett anslutningshölje med en annan metod än den som anges här kan skada enheten och göra garantin ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till att inga vassa föremål, t ex saxar, skalpeller eller kauteriseringsknivar, kommer i kontakt med givare eller kablar.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till, när du hanterar en givare, att den inte stöter emot hårda ytor.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en kirurgborste vid rengöring av givare. Även användning av mjuka borstar kan skada givare.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en borste vid rengöring av kontakthöljets etikett.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte pappersprodukter eller produkter med slipande verkan vid rengöring av en givare. De skadar givarens mjuka lins (det akustiska fönstret). Skursvampar eller andra avtorkningsprodukter med slipande verkan, t.ex. Wypall X60, kan skada linsen.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring, desinficering och sterilisering ska de delar av givaren, kontakthöljet eller kabeln som inte får utsättas för väta placeras högre än de våta delarna, tills alla delar är torra. Detta hindrar vätska från att tränga in i givarens öppna delar.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontakternas hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. Se till att ingen vätska kommer in i handtaget eller styrmekanismen på TEE-givare. När kontakten eller handtagets hölje torkas av eller sprejas ska det endast ske på ytterytorna. När så är möjligt placeras ett stänkskydd för kontakthöljet över de elektriska kontakterna för att förhindra vätska från att tränga in i kontaktens hölje. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Sterilisera aldrig givaren med autoklavering, gammastrålning, gas, ånga eller värme. Allvarliga skador kan uppstå. Sådana skador på givaren som går att undvika täcks inte av garanti eller servicekontrakt.

**FÖRSIKTIGHET**

Utsätt inte givaren för rengöringsmedel och desinfektionsmedel under längre tid. Begränsa den tid som givaren utsätts för rengöringsmedel och desinfektionsmedel till den minimitid som krävs enligt tillverkarens rekommendationer.

**FÖRSIKTIGHET**

Innan du förvarar givare säkerställer du att de är helt torra. Om givarens lins (det akustiska fönstret) behöver torkas av efter rengöring ska du använda en mjuk och torr duk som inte luddar, och använda en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. Linsen kan skadas om du torkar eller skrubbar för hårt.



## Minimera effekterna av desinfektionsmedelsrester

Om du använder ett OPA-baserat desinfektionsmedel (OPA = ortoformaldehyd) kan rester av lösningen finnas kvar på givarna om du inte noggrant följer tillverkarnas instruktioner.

Minimera effekterna från rester av OPA eller något annat desinfektionsmedel med hjälp av följande rekommendationer från Philips:

- Följ mycket noggrant desinfektionsmedeltillverkarens instruktioner. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis att givarna sköljs tre gånger med rent vatten.
- Låt inte givaren utsättas för desinfektionsmedel längre än den minimitid som krävs enligt desinfektionstillverkarens rekommendationer. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis minst 12 minuter.

## Riktlinjer för AR-utrustning (automatisk desinfektor)

Endast vissa givare är kompatibla med en automatisk desinfektor och apparaten får endast användas med vissa lösningar eller processvillkor.

Givare från Philips kan desinficeras i en automatisk desinfektor om följande villkor uppfylls:

- Alla kemikalier och processvillkor som används måste vara kompatibla med den specifika givaren från Philips som ska desinficeras, och kemikalierna måste användas i enlighet med de villkor som rekommenderas av den automatiska desinfektorns tillverkare.
- Temperaturen får inte överskrida 55 °C (131 °F) under desinficeringen.
- Förutom vid användning av Sterrad-systemet måste givarkontakten isoleras från rengörings- eller desinfektionsmedlet under hela desinficeringsprocessen. Detta begränsar risken för att handtaget eller kontakten utsätts för stänk.

Följande är de automatiska desinfektorer som uppfyller desinficeringskraven för specifika givare från Philips. Dessa automatiska desinfektorer är antingen specifikt utformade för eller har tillbehör som ger stöd för desinficering av specifika givare.



## FÖRSIKTIGHET

Automatiska desinfektorer får inte användas för att rengöra USB-givare.

### Automatiska desinfektorer som är kompatibla med givare från Philips (ej TEE-givare)

Tillverkare	Ursprungsland	Modell	Typ av givare	Kompatibla desinfektionsmedel	Processvillkor
Avancerade steriliseringsprodukter	US	STERRAD 100S	L10-4lap, C9-3io	--	Väteperoxid
CIVCO Medical Solutions	US	Astra VR	Inre håligheter <sup>1</sup>	Cidex OPA, Resert XL HLD, Metricide OPA Plus	32 °C
Germitec	FR	Antigermix S1	Multiple <sup>2</sup>	--	UV-C
Nanosonics	AU	Trophon EPR	Multiple <sup>3</sup>	--	Väteperoxid

1. Information om kompatibla givare finns under Astra VR i användarmanualen *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*.
2. Information om kompatibla givare finns under Antigermix S1 i användarmanualen *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*.
3. Information om kompatibla givare finns under Trophon EPR i användarmanualen *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*.

### Rengöra icke-TEE-givare, kablar och kontakter

Dessa allmänna rengöringsanvisningar måste följas för alla icke-TEE-givare, kablar och kontakter.

Alla givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. För att desinficeringen eller steriliseringen skall ha effekt är det viktigt att givaren är rengjord. Innan du rengör en givare ska du läsa avsnittet ”Säkerhet” och ”Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare” på sid 35.

Efter rengöring måste du desinficera eller sterilisera icke-TEE-givare genom att följa tillämpliga procedurer:

- ”Lågnivådesinficering av icke-TEE-givare” på sid 45
- ”Högnivådesinficering av icke-TEE-givare” på sid 47
- ”Sterilisera icke-TEE-givare” på sid 50



#### **VARNING**

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Kompatibla rengöringsmedel eller rengöringsservetter för givaren, kabeln och kontakten (enzymrengöringsmedel rekommenderas)
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Efter varje patientundersökning ska ultraljudsgelen tas bort från givaren med en mjuk duk som fuktats med vatten eller godkänt rengörings- eller desinfektionsmedel, eller med en godkänd förindränkt rengörings- eller desinfektionsservett. Ta bort gelen från linsen med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. En lista över kompatibla rengörings- eller desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

2. Koppla bort givaren från systemet och ta bort alla tillbehör som är anslutna till eller skyddar givaren. Tryck på kontaktskyddet om det finns på kontakten för att skydda kontakterna mot vätskestänk.
3. Ta bort eventuella gelrester från givaren och linsen med vatten och en mjuk svamp eller med handen (med handske på). Om det inte finns rinnande vatten i lokalen kan du använda en förin-dränkt mjuk duk eller en rengöringsservett. Ta bort gelen från linsen med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse.


Vid rengöring av kontakten får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontaktens hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. När kontakten torkas eller sprejas ska det endast ske på ytterytorna av kontaktens hölje.

4. Avlägsna eventuella partiklar och kroppsvätskor som finns kvar på givaren, kabeln eller kontakten med en mjuk duk som fuktats i svag tvållösning eller enzymrengöringsmedel (enligt tillverkarens instruktioner). Enzymrengöringsmedel är allmänt kompatibla för användning.
5. Vid rengöring av linsen använder du en klappande rörelse snarare än en torkande rörelse.
6. För att ta bort kvarvarande partiklar och rengöringsmedelsrester, använd rengöringsservetter enligt tillverkarens instruktioner eller skölj rikligt med vatten upp till nedsänkningspunkten som visas nedan. Sänk inte ned kontakten, kontaktens avlastare eller kabeln inom 5 cm från kontaktens avlastare. (Upp till 5 cm från avlastaren är den maximalt tillåtna nedsänkningspunkten för kabeln – du behöver inte sänka ned till denna punkt om det inte behövs.)

## ANM

Om du använder rengöringsservetter kanske du inte behöver skölja givaren med vatten. Följ alltid rekommendationerna på produktetiketten.

7. Lufttorka givaren eller torka av den med en mjuk och torr duk som inte luddar. Torka linsen med en baddande rörelse i stället för en avtorkande rörelse.
8. Kontrollera att enheten och kabeln inte har skador såsom sprickor, bristningar, skarpa kanter eller utskjutande delar. Om skador förekommer får enheten inte längre användas. Kontakta i så fall representanten från Philips.

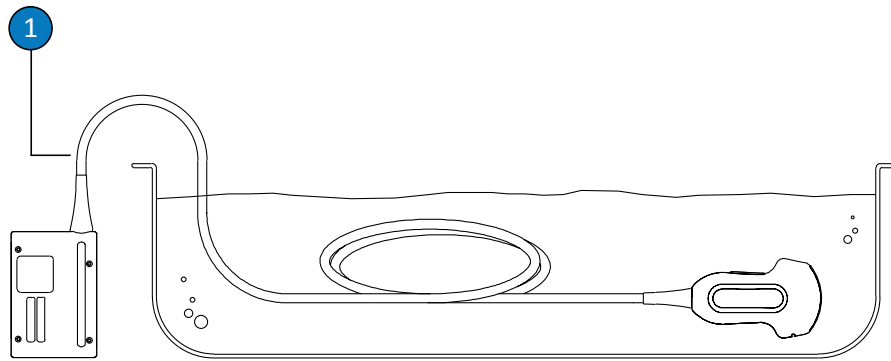

#### Nedsänkingspunkt för icke-TEE-givare

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Sänk inte ned längre än till denna punkt, inom 5 cm från kontaktens avlastare. Detta är maximalt tillåtet nedsänkingsdjup för kabeln – man måste inte sänka ned till denna punkt om det inte är nödvändigt. |
|---|---|

### Lågnivådesinficering av icke-TEE-givare

Lågnivådesinficering av icke-TEE-givare sker genom sprej- eller servettmetoden, med ett desinfektionsmedel på låg- eller mellannivå. Läs varningarna och försiktighetsuppsmaningarna i avsnitt "[Säkerhet](#)" och "[Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare](#)" på sid 35 innan du utför den här proceduren, och vidta följande försiktighetsåtgärder.

**VARNING**

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontakternas hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. Se till att ingen vätska kommer in i handtaget eller styrmekanismen på TEE-givare. När kontakten eller handtagets hölje torkas av eller sprejas ska det endast ske på ytterytorna. När så är möjligt placeras ett stänkskydd för kontakthöljet över de elektriska kontakterna för att förhindra vätska från att tränga in i kontaktens hölje. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**ANM**

Givare kan desinficeras genom avtorkning med servett endast om produktmärkningen på det kompatibla desinfektionsmedel som du använder anger att det kan användas med en servettmetod.

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Desinfektionsmedel på låg- eller mellannivå som är kompatibla med givaren, kabeln, avlastaren och kontakten.
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Rengör givaren och kabeln enligt procedurerna som beskrivs i ["Rengöra icke-TEE-givare, kablar och kontakter"](#) på sid 42. Läkta alla varningar och försiktighetsåtgärder.

2. Efter rengöring väljer du ett desinfektionsmedel på låg- eller mellannivå som är kompatibelt med givaren, kabeln och kontakten. En lista över kompatibla desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

3. Torka av eller spraya givaren, kabeln, avlastaren och kontakten med desinfektionsmedlet. Följ anvisningarna på desinfektionsmedlets etikett om temperatur, hur länge kabeln ska torkas av och hur länge desinfektionsmedlet får ha kontakt med kabeln. Se till att desinficeringslösningen inte tränger in i enheten eller kontakten.

Vid desinficering av kontaktens hölje, torka eller spreja endast ytterytorna. Låt inte någon typ av vätska tränga in genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften eller områdena runt låsspaksskaftet.

4. Lufttorka givaren eller torka av den med en mjuk och torr duk som inte luddar. Torka linsen med en baddande rörelse i stället för en avtorkande rörelse.
5. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.

## Högnivådesinficering av icke-TEE-givare

Högnivådesinficering av icke-TEE-givare sker normalt genom blötläggning i ett desinfektionsmedel på hög nivå. Automatiska desinfektorer kan användas för att desinficera vissa givare. För mer information, se ["Riktlinjer för AR-utrustning \(automatisk desinfektor\)" på sid 41](#). Läs varningarna och försiktighetsuppsmaningarna i avsnitt ["Säkerhet"](#) och ["Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare"](#) på sid 35 innan du utför den här proceduren, och vidta följande försiktighetsåtgärder.

**VARNING**

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontakternas hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. Se till att ingen vätska kommer in i handtaget eller styrmekanismen på TEE-givare. När kontakten eller handtagets hölje torkas av eller sprejas ska det endast ske på ytterytorerna. När så är möjligt placeras ett stänkskydd för kontakthöljet över de elektriska kontakterna för att förhindra vätska från att tränga in i kontaktens hölje. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**ANM**

För vissa högnivådesinfektionslösningar krävs det inte att TEE-givarna blötläggs, och dessa är kompatibla med icke-TEE-givare. Information om kompatibla medel för högnivådesinficering finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*. Om du väljer att använda sådana desinfektionsmedel ska du alltid följa tillverkarens anvisningar. Följ riktlinjerna i den här manualen som motsvarar desinficeringsmetoden "Behörig användning" för valt desinfektionsmedel, enligt definitionen i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*.


Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
- Desinfektionsmedel på hög nivå som är kompatibla med givaren, kabeln och kontakten
- Blötläggningstråg
- Mjuk och torr duk som inte luddar



1. Rengör givaren och kabeln enligt procedurerna som beskrivs i ["Rengöra icke-TEE-givare, kablar och kontakter"](#) på sid 42. Iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder.
2. Efter rengöring ska du använda en desinfektionslösning på hög nivå som är kompatibel med givaren. En lista över kompatibla desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:  
[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)  
Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.
3. Använd ett lämpligt desinficeringsmedel för kabeln och kontakten, torka eller spreja kabeln, avlastaren och kontakten enligt instruktionerna på desinficeringsmedlets etikett om temperatur, avtorkningstid, lösningens styrka och kontakttid för desinfektionsmedlet. Se till att desinficeringslösningen inte tränger in i enheten eller kontakten.  
Vid desinficering av kontaktens hölje, torka eller spreja endast ytterytorna. Låt inte någon typ av vätska tränga in genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften eller områdena runt låsspaksskaftet.
4. Sänk ned givaren i lämpligt desinfektionsmedel i enlighet med bilden som visas nedan. Sänk inte ned kontakten, kontaktens avlastare eller kabeln inom 5 cm från kontaktens avlastare. (Upp till 5 cm från avlastaren är den maximalt tillåtna nedsänkningspunkten för kabeln – du behöver inte sänka ned till denna punkt om det inte behövs.)
5. Följ anvisningarna på desinfektionsmedlets etikett angående hur länge givaren ska vara nedsänkt. Sänk inte ner givare längre än minimitiden som krävs för rätt desinficeringsnivå.
6. Följ anvisningarna på desinficeringsmedlets etikett och skölj givaren upp till nedsänkningspunkten. Sänk inte ned kontakten, kontaktens avlastare eller kabeln inom 5 cm från kontaktens avlastare. (Upp till 5 cm från avlastaren är den maximalt tillåtna nedsänkningspunkten för kabeln – du behöver inte sänka ned till denna punkt om det inte behövs.)
7. Lufttorka givaren eller torka av den med en mjuk och torr duk som inte luddar. Torka linsen med en baddande rörelse i stället för en avtorkande rörelse.

8. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.

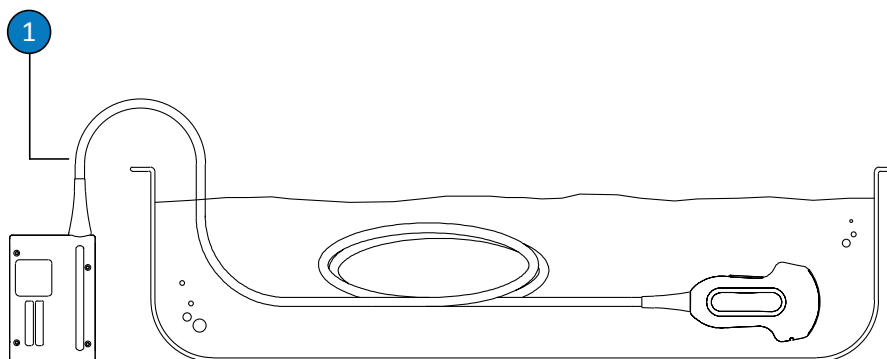

Nedsänkingspunkt för icke-TEE-givare

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Sänk inte ned längre än till denna punkt, inom 5 cm från kontaktens avlastare. Detta är maximalt tillåtet nedsänkingsdjup för kabeln – man måste inte sänka ned till denna punkt om det inte är nödvändigt. |
|---|---|

## Sterilisera icke-TEE-givare

Sterilisering är nödvändigt om givaren förs in i vävnad som annars är steril utan ett sterilt skydd. Om du använder ett sterilt skydd rekommenderas sterilisering, men högnivådesinfektion är acceptabelt. Den huvudsakliga skillnaden mellan sterilisering och högnivådesinficering är hur lång tid givaren är nedsänkt i vätskan och vilken typ av desinfektionsmedel eller steriliseringslösning som används.

Information om huruvida givaren ska steriliseras eller högnivådesinficeras finns i avsnittet ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31.

Innan du genomför den här proceduren ska du läsa varningarna och försiktighetsanmärkningarna i avsnittet ["Säkerhet"](#) och ["Varningar och försiktighetsåtgärder för icke-TEE-givare"](#) på sid 35.

**VARNING**

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Sterilisera aldrig givaren med autoklavering, gammastrålning, gas, ånga eller värme. Allvarliga skador kan uppstå. Sådana skador på givaren som går att undvika täcks inte av garanti eller servicekontrakt.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontakternas hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. Se till att ingen vätska kommer in i handtaget eller styrmekanismen på TEE-givare. När kontakten eller handtagets hölje torkas av eller sprejas ska det endast ske på ytterytorna. När så är möjligt placeras ett stänkskydd för kontakthöljet över de elektriska kontaktorna för att förhindra vätska från att tränga in i kontaktens hölje. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Desinfektionsmedel på hög nivå som är kompatibla med givaren, kabeln och kontakten
  - Steriliseringslösning som är kompatibel med givaren och kabeln
  - Blötläggningstråg
  - Mjuk, torr och steril duk som inte luddar
1. Rengör givaren och kabeln enligt procedurerna som beskrivs i ["Rengöra icke-TEE-givare, kablar och kontakter"](#) på sid 42.


2. Efter rengöring väljer du ett högnivådesinfektionsmedel eller en steriliseringslösning som är kompatibel med givaren. En lista över kompatibla desinfektionsmedel och steriliseringslösningar finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

3. Använd ett lämpligt desinficeringsmedel för kabeln och kontakten, torka eller spreja kabeln, avlastaren och kontakten enligt instruktionerna på desinficeringsmedlets etikett om temperatur, avtorkningstid, lösningens styrka och kontakttid för desinfektionsmedlet. Se till att desinficeringslösningen inte tränger in i enheten eller kontakten.  
Vid desinficering av kontaktens hölje, torka eller spreja endast ytterytorna. Låt inte någon typ av vätska tränga in genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften eller områdena runt låsspaksskaftet.
4. Sänk ned givaren i steriliseringslösningen i enlighet med bilden nedan. Sänk inte ned kontakten, kontaktens avlastare eller kabeln inom 5 cm från kontaktens avlastare. (Upp till 5 cm från avlastaren är den maximalt tillåtna nedsänkningspunkten för kabeln – du behöver inte sänka ned till denna punkt om det inte behövs.)
5. Följ anvisningarna på steriliseringsmedlets etikett för hur länge givaren ska vara nedsänkt för att bli steriliserad.
6. Ta upp givaren ur steriliseringslösningen efter rekommenderad steriliseringstid.
7. Följ anvisningarna på steriliseringsetiketten och skölj givaren i sterilt vatten upp till nedsänkningspunkten. Sänk inte ned kontakten, kontaktens avlastare eller kabeln inom 5 cm från kontaktens avlastare. (Upp till 5 cm från avlastaren är den maximalt tillåtna nedsänkningspunkten för kabeln – du behöver inte sänka ned till denna punkt om det inte behövs.)
8. Lufttorka givaren eller torka av den med en mjuk, torr och steril duk som inte luddar. Torka linsen med en baddande rörelse i stället för en avtorkande rörelse.

9. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.

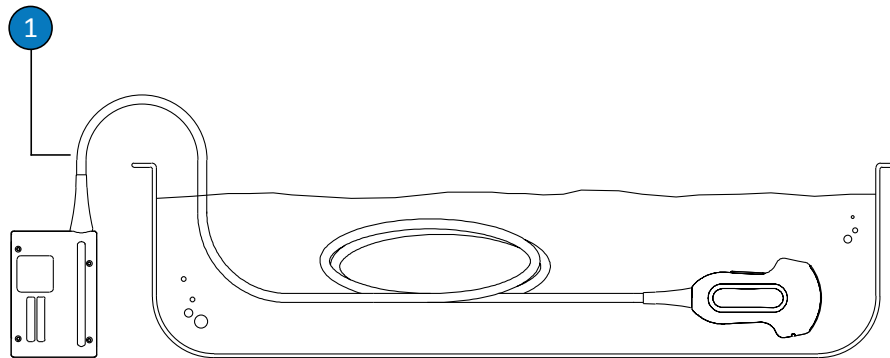


Nedsänkningspunkt för icke-TEE-givare

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Sänk inte ned längre än till denna punkt, inom 5 cm från kontaktens avlastare. Detta är maximalt tillåtet nedsänkningsdjup för kabeln – man måste inte sänka ned till denna punkt om det inte är nödvändigt. |
|---|--|

## USB-givarskötsel

Följande ämnesavsnitt beskriver rengöring, desinficering och sterilisering av givare med USB-kontakt. Information om lämplig metod för skötsel av givaren finns i avsnittet ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31. Följande bild visar komponenterna i en givare med USB-kontakt.

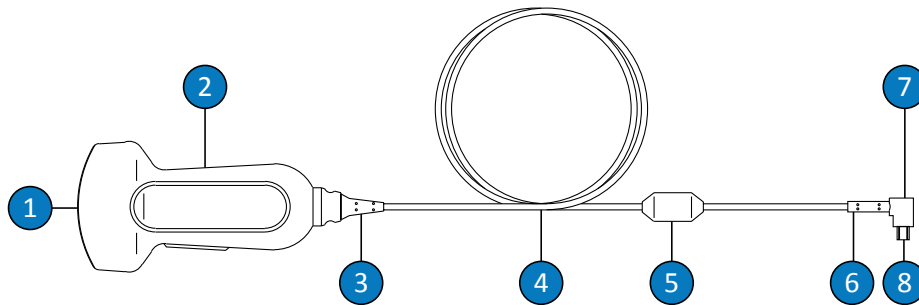

#### USB-givarnas delar

1	Givarens lins (akustiskt fönster)
2	Givarens hölje
3	Givarens avlastare
4	Kabel
5	Ferritblock
6	USB-kontaktens avlastare
7	USB-kontakt
8	Elektriska kontakter

### Varningar och försiktighetsåtgärder för USB-givare

läkta följande varningar och försiktighetsanmärkningar under all rengöring och desinficering. Specifika varningar och försiktighetsanmärkningar finns i procedurerna för skötsel och rengöring och på rengörings- och desinfektionsmedlens etiketter.

**VARNING**

Givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. För att desinficeringen eller steriliseringen skall ha effekt är det viktigt att givaren är rengjord. Följ tillverkarens anvisningar när du använder desinfektionsmedel.

**VARNING**

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**VARNING**

Desinfektionsmedlen rekommenderas för deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen, inte för deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vilken desinfektionsnivå en enhet behöver beror på vilken typ av vävnad den är i kontakt med under användningen och typen av givare som används. Säkerställ att desinfektionsmedlets typ passar för givaren i fråga och givarens användningsområde. För information om desinficeringskravens nivåer, se ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31. Se även instruktioner på desinfektionsmedlets förpackning och rekommendationer från APIC (förbundet för praktiserande läkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

**VARNING**

Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.


**FÖRSIKTIGHET**

Användning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel lösningsstyrka samt djupare eller mer långvarig nedsänkning än vad som rekommenderas kan skada eller missfärga givaren. Givarens garanti blir därtill ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av isopropylalkohol (tvättspirit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På givare med USB-anslutningar är de enda delarna som kan rengöras med alkohol givarhöljet och linsen (det akustiska fönstret). Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.



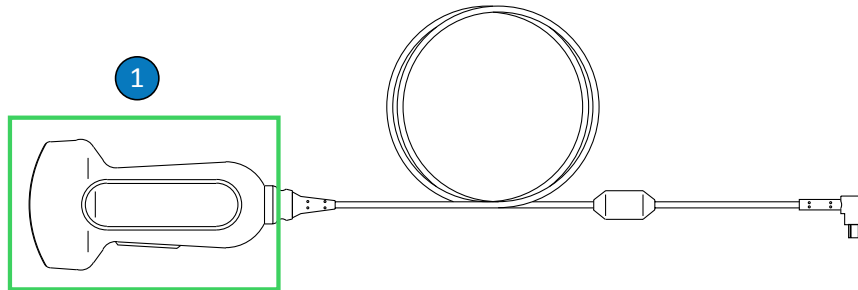

#### Alkoholkompatibla delar på USB-givare

- 1 De enda delar som kan rengöras med lösningar med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol är givarhöljet och linsen (det akustiska fönstret). Se till att ingen vätska kommer in i något oförseglat område av givaren. Rengör linsens yta med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. Linsen kan skadas om du torkar eller skrubbar för hårt.



#### FÖRSIKTIGHET

Vid användning av ett enzymatiskt rengöringsmedel ska du säkerställa att du använder rätt koncentration och skölja noga. Enzymrengöringsmedel är allmänt kompatibla för användning.



#### FÖRSIKTIGHET

Rengöring eller desinficering av en givare, kabel eller ett anslutningshölje med en annan metod än den som anges här kan skada enheten och göra garantin ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till att inga vassa föremål, t ex saxar, skalpeller eller kauteriseringsknivar, kommer i kontakt med givare eller kablar.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till, när du hanterar en givare, att den inte stöter emot hårda ytor.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en kirurgborste vid rengöring av givare. Även användning av mjuka borstar kan skada givare.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en borste vid rengöring av givarens etikett.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte pappersprodukter eller produkter med slipande verkan vid rengöring av en givare. De skadar givarens mjuka lins (det akustiska fönstret). Skursvampar eller andra avtorkningsprodukter med slipande verkan, t.ex. Wypall X60, kan skada linsen.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring, desinficering och sterilisering ska de delar av givaren, kontakthöljet eller kabeln som inte får utsättas för väta placeras högre än de våta delarna, tills alla delar är torra. Detta hindrar vätska från att tränga in i givarens öppna delar.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får det inte tränga in vätska i USB-kontaktens elektriska anslutningar eller metalldelar. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Förhindra att vätska tränger in i givaren genom att inte koppla från USB-kabeln från givaren under rengöring och desinficering.

**FÖRSIKTIGHET**

Utsätt inte givaren för rengöringsmedel och desinfektionsmedel under längre tid. Begränsa den tid som givaren utsätts för rengöringsmedel och desinfektionsmedel till den minimitid som krävs enligt tillverkarens rekommendationer.

**FÖRSIKTIGHET**

Innan du förvarar givare säkerställer du att de är helt torra. Om givarens lins (det akustiska fönstret) behöver torkas av efter rengöring ska du använda en mjuk trasa och en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. Linsen kan skadas om du torkar eller skrubbar för hårt.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd enbart flytande lösningar för att sterilisera givare. Om autoklavering, gas (EtO) eller annan metod som inte har godkänts av Philips används, kan givaren skadas varvid garantin upphör att gälla.

## Minimera effekterna av desinfektionsmedelsrester

Om du använder ett OPA-baserat desinfektionsmedel (OPA = ortoftalaldehyd) kan rester av lösningen finnas kvar på givarna om du inte noggrant följer tillverkarnas instruktioner.

Minimera effekterna från rester av OPA eller något annat desinfektionsmedel med hjälp av följande rekommendationer från Philips:

- Följ mycket noggrant desinfektionsmedeltillverkarens instruktioner. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis att givarna sköljs tre gånger med rent vatten.
- Låt inte givaren utsättas för desinfektionsmedel längre än den minimitid som krävs enligt desinfektionstillverkarens rekommendationer. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis minst 12 minuter.

## Rengöra USB-givare, kablar och kontakter

Dessa allmänna rengöringsanvisningar måste följas för alla USB-givare, kablar och kontakter. Alla givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. För att desinficeringen eller steriliseringen skall ha effekt är det viktigt att givaren är rengjord.

Läs varningarna och försiktighetsanmärkningarna i avsnitt "[Säkerhet](#)" och "[Varningar och försiktighetsåtgärder för USB-givare](#)" på sid 54 innan du rengör en givare, och vidta följande försiktighetsåtgärder.

Efter rengöring måste du desinficera givarna genom att följa tillämpliga procedurer:

- "[Lågnivådesinficering av USB-givare](#)" på sid 63
- "[Högnivådesinficering av USB-givare](#)" på sid 65
- "[Sterilisera USB-givare](#)" på sid 68



### VARNING

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får det inte tränga in vätska i USB-kontaktens elektriska anslutningar eller metalldelar. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Förhindra att vätska tränger in i givaren genom att inte koppla från USB-kabeln från givaren under rengöring och desinficering.

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Kompatibla rengöringsmedel eller rengöringsservetter för givaren, kabeln och kontakten (enzymrengöringsmedel rekommenderas)
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Efter varje patientundersökning ska ultraljudsgelen tas bort från givaren med en mjuk duk som fuktats med vatten eller godkänt rengörings- eller desinfektionsmedel, eller med en godkänd förindränkt rengörings- eller desinfektionsservett. Ta bort gelen från linsen med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. En lista över kompatibla rengörings- eller desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)


Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

2. Koppla bort givaren från systemet och ta bort alla tillbehör som är anslutna till eller skyddar givaren. Tryck på kontaktskyddet om det finns på kontakten för att skydda kontakterna mot vätskestänk.
3. Ta bort eventuella gelrester från givaren och linsen med vatten och en mjuk svamp eller med handen (med handske på). Om det inte finns rinnande vatten i lokalen kan du använda en förinränd mjuk duk eller en rengöringsservett. Ta bort gelen från linsen med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse.
4. Avlägsna eventuella partiklar och kroppsvätskor som finns kvar på givaren, kabeln, ferritblocket eller kontakten med en mjuk duk som fuktats i svag tvållösning eller enzymrengöringsmedel (enligt tillverkarens instruktioner). Enzymrengöringsmedel är allmänt kompatibla för användning.
5. Ta bort kvarvarande partiklar och rengöringsmedelsrester med rengöringsservetter enligt tillverkarens instruktioner. Du kan skölja givaren noggrant med vatten upp till den nedsänkingspunkt som visas i bilden nedan. Ingen annan del av givaren, kabeln eller USB-kontakten får blötläggas eller nedsänkas i vätska.

### **ANM**

Om du använder rengöringsservetter kanske du inte behöver skölja givaren med vatten. Följ alltid anvisningarna på produktetiketten.

6. Torka av givaren med en mjuk och torr duk som inte luddar. Torka av linsen med en mjuk och torr duk som inte luddar och använd en baddande rörelse. Använd inte en avtorkande rörelse.
7. Kontrollera att enheten och kabeln inte har skador såsom sprickor, bristningar, skarpa kanter eller utskjutande delar. Om skador förekommer får enheten inte längre användas. Kontakta i så fall representanten från Philips.

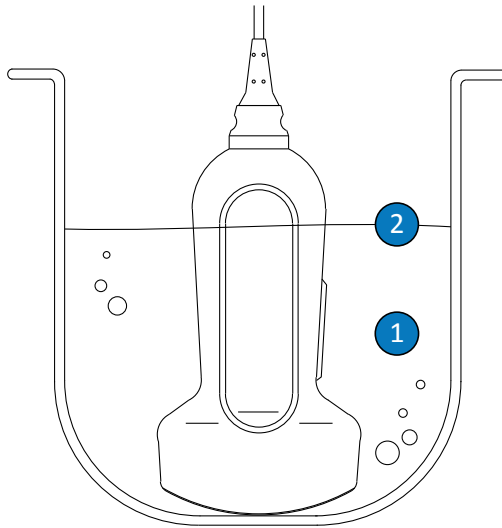

#### Nedsänkingspunkt för USB-givare

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Endast den här delen får sänkas ned i vätska.   |
| 2 | Maximalt tillåtet nedsänkingsdjup. Du behöver inte sänka ned till detta djup om det inte är nödvändigt. |

### Lågnivådesinficering av USB-givare

Lågnivådesinficering av USB-givare sker genom spray- eller servettmetoden med ett desinfektionsmedel på låg- eller mellannivå. Läs varningarna och försiktighetsanmärkningarna i avsnittet och ["Varningar och försiktighetsåtgärder för USB-givare"](#) på sid 54 innan du utför den här proceduren, och vidta följande försiktighetsåtgärder.



#### **VARNING**

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får det inte tränga in vätska i USB-kontaktens elektriska anslutningar eller metalldelar. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Förhindra att vätska tränger in i givaren genom att inte koppla från USB-kabeln från givaren under rengöring och desinficering.

**ANM**

Givare kan desinficeras genom avtorkning med servett endast om produktmärkningen på det kompatibla desinfektionsmedel som du använder anger att det kan användas med en servettmetod.

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Desinfektionsmedel på låg- eller mellannivå som är kompatibla med givaren, kabeln och kontakten.
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Rengör givaren och kabeln enligt procedurerna som beskrivs i **”Rengöra USB-givare, kablar och kontakter” på sid 60**. Laktta alla varningar och försiktighetsåtgärder.
  2. Efter rengöring ska du använda en desinfektionslösning på låg eller mellanhög nivå som är kompatibel med givaren. En lista över kompatibla desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:  
[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)



Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

3. Använd ett lämpligt desinficeringsmedel för USB-kabeln och kontakten och torka eller spreja kabeln, avlastaren, ferritblocket och USB-kontakten enligt instruktionerna på desinfektionsmedlets etikett om temperatur, avtorkningstid, lösningens styrka och kontakttid för desinfektionsmedlet. Se till att desinficeringslösningen inte tränger in i enheten eller kontakten. Vid desinficering av USB-kabeln ska du endast torka av eller spreja yttertyrorna. Låt inte någon typ av vätska tränga in genom avlastaren, kontakten eller de elektriska kontaktstiften. Vätska i kontakten kan göra enhetens garanti ogiltig.
4. Lufttorka givaren eller torka med en mjuk och torr duk som inte luddar i enlighet med instruktionerna på desinfektionsmedlets etikett.
5. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.

## Högnivådesinficering av USB-givare

Högnivådesinficering av USB-givare sker normalt genom blötläggning i ett desinfektionsmedel på hög nivå. Läs varningarna och försiktighetsanmärkningarna i avsnittet ["Säkerhet"](#) och ["Varningar och försiktighetsåtgärder för USB-givare"](#) på sid 54 innan du utför den här proceduren, och vidta följande försiktighetsåtgärder.



### **VARNING**

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får det inte tränga in vätska i USB-kontaktens elektriska anslutningar eller metalldelar. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Förhindra att vätska tränger in i givaren genom att inte koppla från USB-kabeln från givaren under rengöring och desinficering.


Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Mjuk fuktad duk eller svamp som inte repar
  - Desinfektionsmedel på hög nivå som är kompatibla med givaren, kabeln och kontakten
  - Blötläggningstråg
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Rengör givaren och kabeln enligt procedurerna som beskrivs i ["Rengöra USB-givare, kablar och kontakter"](#) på sid 60. Iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder.
  2. Efter rengöring ska du använda en desinfektionslösning på hög nivå som är kompatibel med givaren. En lista över kompatibla desinfektionsmedel finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Följ anvisningarna på etiketten angående preparering, temperatur, lösningsstyrka och hur länge givaren ska vara nedsänkt. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

3. Använd ett lämpligt desinficeringsmedel för USB-kabeln och kontakten och torka eller spreja kabeln, avlastaren, ferritblocket och USB-kontakten enligt instruktionerna på desinfektionsmedlets etikett om temperatur, avtorkningstid, lösningens styrka och kontakttid för desinfektionsmedlet. Se till att desinficeringslösningen inte tränger in i enheten eller kontakten. Vid desinficering av USB-kabeln ska du endast torka av eller spreja yttertyrorna. Låt inte någon typ av vätska tränga in genom avlastaren, kontakten eller de elektriska kontaktstiften. Vätska i kontakten kan göra enhetens garanti ogiltig.
4. Sänk ned givaren i lämpligt desinfektionsmedel i enlighet med bilden som visas nedan. Givaren får endast nedsänkas i vätska upp till den nedsänkningspunkt som visas. Ingen annan del av givaren, kabeln, avlastaren eller kontakten får blötläggas eller nedsänkas i vätska.
5. Följ anvisningarna på desinfektionsmedlets etikett angående hur länge givaren ska vara nedsänkt. Sänk inte ner givare längre än minimitiden som krävs för rätt desinficeringsnivå.
6. Följ anvisningarna på desinficeringsmedlets etikett och skölj givaren upp till nedsänkningspunkten. Ingen annan del av givaren, kabeln, avlastaren eller kontakten får blötläggas eller nedsänkas i vätska.
7. Lufttorka givaren eller torka med en mjuk och torr duk som inte luddar i enlighet med instruktionerna på desinfektionsmedlets etikett.
8. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.

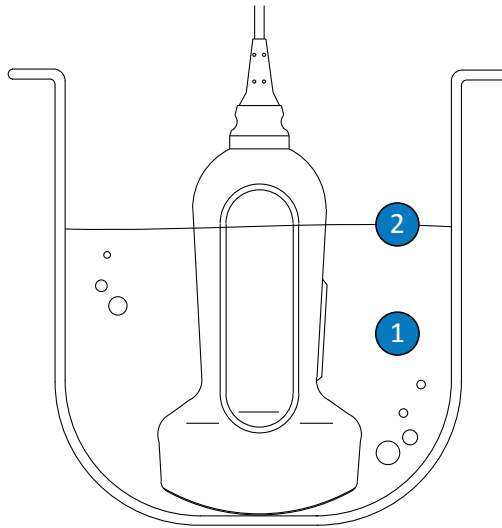

#### Nedsänkingspunkt för USB-givare

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Endast den här delen får sänkas ned i vätska.   |
| 2 | Maximalt tillåtet nedsänkingsdjup. Du behöver inte sänka ned till detta djup om det inte är nödvändigt. |

### Sterilisera USB-givare


Den huvudsakliga skillnaden mellan högnivådesinficering och sterilisering är hur lång tid givaren är nedsänkt i vätskan och vilken typ av desinfektionsmedel eller steriliseringslösning som används. Följ samma rutiner vid sterilisering som för högnivådesinficering, men använd en kompatibel steriliseringslösning och följ tillverkarens anvisningar för preparering, temperatur, lösningsstyrka och kontakttider.

## TEE-givarskötsel

Följande ämnen beskriver rengöring, desinfektion och sterilisering av transesofageala ekokardiografiska (TEE)-givare. Information om lämplig metod för skötsel av givaren finns i avsnittet ["Metoder för givarskötsel" på sid 31](#).

Vid mottagningen av en ny givare desinficerar du den innan du utför den första undersökningen. Rengör och desinficera givaren omedelbart efter varje användning för att skydda patienter och personal från patogener. Upprätta och anslå tydligt en rengöringsprocedur som omfattar stegen som beskrivs i detta avsnitt.

Följande figur identifierar komponenterna i en TEE-givare.

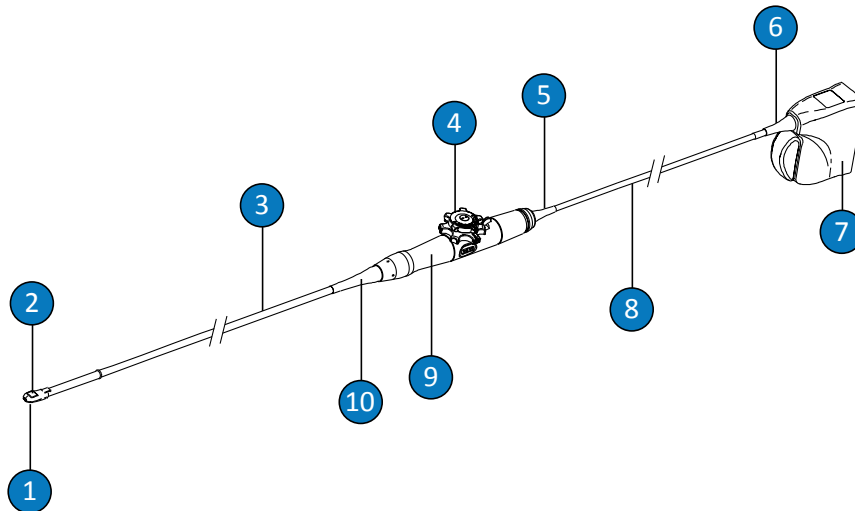

TEE-givarnas delar

1	Distal spets
2	Givarens lins (akustiskt fönster)
3	Rörligt skaft
4	Givarreglage

5	Avlastare för reglagehöljet (handtaget)
6	Kontaktens avlastare
7	Kontaktens hölje
8	Kabel
9	Reglagehölje (handtag)
10	Avlastare för reglagehöljet (handtaget)

## Varningar och försiktighetsåtgärder för TEE-givare

lakta följande varningar och försiktighetsanmärkningar under all rengöring, desinficering och sterilisering vid användning av desinfektionsmedel. Specifika varningar och försiktighetsanmärkningar finns i procedurerna för skötsel och rengöring och på rengörings- och desinfektionsmedlens etiketter.



### VARNING

**Givare måste rengöras efter varje användningstillfälle. För att desinficeringen eller steriliseringen skall ha effekt är det viktigt att givaren är rengjord. Följ tillverkarens anvisningar när du använder desinfektionsmedel.**



### VARNING

**Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.**

**FÖRSIKTIGHET**

Sterilisera aldrig givaren med autoklavering, gammastrålning, gas, ånga eller värme. Allvarliga skador kan uppstå. Sådana skador på givaren som går att undvika täcks inte av garanti eller servicekontrakt.

**WARNING**

Sterila givarskydd är engångsartiklar och får inte återanvändas.

**WARNING**

Bitskydd är obligatoriska för TEE-givare.

**WARNING**

Desinfektionsmedlen rekommenderas för deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen, inte för deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vilken desinfektionsnivå en enhet behöver beror på vilken typ av vävnad den är i kontakt med under användningen och typen av givare som används. Säkerställ att desinfektionsmedlets typ passar för givaren i fråga och givarens användningsområde. För information om desinficeringskravens nivåer, se ["Metoder för givarskötsel" på sid 31](#). Se även instruktioner på desinfektionsmedlets förpackning och rekommendationer från APIC (förbundet för praktiserande läkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Vid sterilisering av en givare ska du se till att steriliseringsmedlets styrka och varaktighet för kontakt är lämpliga för sterilisering. Följ tillverkarens anvisningar.

**VARNING**

Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

**VARNING**

Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.

**FÖRSIKTIGHET**


Användning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel lösningsstyrka samt djupare eller mer långvarig nedsänkning än vad som rekommenderas kan skada eller missfärga givaren. Givarens garanti blir därtill ogiltig.





### FÖRSIKTIGHET

Användning av isopropylalkohol (tvättspnit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och kontrollhöljet. Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Rengör inte någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar eller kabelavlastare), eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

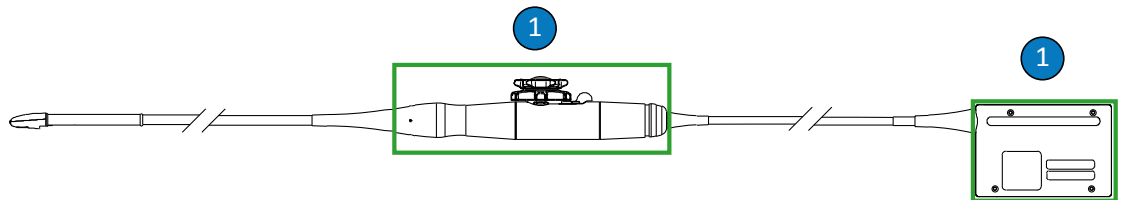

Alkoholkompatibla delar på TEE-givare

- 1 De enda delar som kan rengöras med lösningar med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol är kontakthöljet och kontrollhöljet. Se till att ingen vätska kommer in i något oförseglat område av givaren.



### FÖRSIKTIGHET

Vid användning av ett enzymatiskt rengöringsmedel ska du säkerställa att du använder rätt koncentration och skölja nogga. Enzymrengöringsmedel är allmänt kompatibla för användning.



### FÖRSIKTIGHET

Använd inte blekmedel på givare eller skaft.

**FÖRSIKTIGHET**

Rengöring eller desinficering av en givare, kabel eller ett anslutningshölje med en annan metod än den som anges här kan skada enheten och göra garantin ogiltig.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till att inga vassa föremål, t ex saxar, skalpeller eller kauteriseringsknivar, kommer i kontakt med givare eller kablar.

**FÖRSIKTIGHET**

Se till, när du hanterar en givare, att den inte stöter emot hårda ytor.

**FÖRSIKTIGHET**

Vecka inte det böjbara skaftet eller kabeln på TEE-givare. Böj inte skaftet till en cirkel på mindre än 30 cm i diameter.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en kirurgborste vid rengöring av givare. Även användning av mjuka borstar kan skada givare.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte en borste vid rengöring av kontakthöljets etikett.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte pappersprodukter eller produkter med slipande verkan vid rengöring av en givare. De skadar givarens mjuka lins (det akustiska fönstret). Skursvampar eller andra avtorkningsprodukter med slipande verkan, t.ex. Wypall X60, kan skada linsen.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring, desinficering och sterilisering ska de delar av givaren, kontakthöljet eller kabeln som inte får utsättas för väta placeras högre än de våta delarna, tills alla delar är torra. Detta hindrar vätska från att tränga in i givarens öppna delar.

**FÖRSIKTIGHET**

Vid rengöring och desinficering av givarna får du inte låta vätska tränga in i kontakten genom avlastaren, de elektriska kontaktstiften, kontakternas hölje eller områdena runt låsspaksskaftet. Se till att ingen vätska kommer in i handtaget eller styrmekanismen på TEE-givare. När kontakten eller handtagets hölje torkas av eller sprejas ska det endast ske på ytterytorna. När så är möjligt placeras ett stänkskydd för kontakthöljet över de elektriska kontakterna för att förhindra vätska från att tränga in i kontaktens hölje. Skada på grund av vätskeintrång i dessa områden täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

**FÖRSIKTIGHET**

Utsätt inte givaren för rengöringsmedel och desinfektionsmedel under längre tid. Begränsa den tid som givaren utsätts för rengöringsmedel och desinfektionsmedel till den minimitid som krävs enligt tillverkarens rekommendationer.

**FÖRSIKTIGHET**

Givarens styrmekanism är inte helt tät på TEE-givare. Om desinfektionsmedel eller andra vätskor kommer in i styrmekanismen oxiderar drivhjulen och de elektriska anslutningarna. Sådana skador på givaren som går att undvika täcks inte av garanti eller servicekontrakt.

**FÖRSIKTIGHET**

Skölj eller sänk inte ner handtaget, styrmekanismen, kabeln, kontakten eller kabelavlastarna på TEE-givare.

**FÖRSIKTIGHET**

Innan du förvarar givare säkerställer du att de är helt torra. Om givarens lins (det akustiska fönstret) behöver torkas av efter rengöring ska du använda en mjuk trasa och en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse. Linsen kan skadas om du torkar eller skrubbar för hårt.

**Minimera effekterna av desinfektionsmedelsrester**

Om du använder ett OPA-baserat desinfektionsmedel (OPA = ortoformaldehyd) kan rester av lösningen finnas kvar på givarna om du inte noggrant följer tillverkarnas instruktioner.

**VARNING**

Rester av OPA på TEE-givarna kan tillfälligt missfärga mun och läppar samt irritera eller orsaka brännsår på mun, hals, matstrupen och i magen.

Minimera effekterna från rester av OPA eller något annat desinfektionsmedel med hjälp av följande rekommendationer från Philips:

- Följ mycket noggrant desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis att givarna sköljs tre gånger med rent vatten.
- Låt inte givaren utsättas för desinfektionsmedel längre än den minimitid som krävs enligt desinfektionstillverkarens rekommendationer. Tillverkaren av Cidex OPA rekommenderar exempelvis minst 12 minuter.

### Försiktighetsåtgärder för S7-3t och S8-3t

På grund av den lilla storleken är givarna S7-3t och S8-3t mycket känsliga elektroniska instrument. Iakttag följande försiktighetsåtgärder för att undvika att skada givarna.



#### FÖRSIKTIGHET

När du torkar av den distala spetsen på givaren S7-3t eller S8-3t får du aldrig använda för stor kraft på linsen (det akustiska fönstret). Torka försiktigt av spetsen med en fuktad duk. Kläm aldrig på linsen, det akustiska fönstret eller spetsen eftersom detta kan skada givaren.



#### FÖRSIKTIGHET

Se till att inga vassa föremål, t ex saxar, skalpeller eller kauteriseringsknivar, kommer i kontakt med givare eller kablar.



#### FÖRSIKTIGHET

Manipulera endast spetsen med kontrollerna, använd inte handen.



#### FÖRSIKTIGHET

Böj inte och vecka inte det böjbara skaftet eller kabeln.



## FÖRSIKTIGHET

Se till, när du hanterar en givare, att den inte stöter emot hårda ytor.

## Riktlinjer för TEE-givare


De här riktlinjerna är avsedda för Philips TEE-givare.

Desinfektion eller sterilisering genom nedsänkning är den godtagbara metoden för infektionskontroll av TEE-givare. Sterilisering är nödvändigt om givaren förs in i vävnad som annars är steril utan ett sterilt skydd. Om du använder ett sterilt skydd rekommenderas sterilisering, men högnivådesinfektion är acceptabelt. Den huvudsakliga skillnaden mellan sterilisering och högnivådesinficering är hur lång tid givaren är nedsänkt i vätskan och vilken typ av desinfektionsmedel eller steriliseringslösning som används.

Information om huruvida givaren ska steriliseras eller högnivådesinficeras finns i avsnittet ["Metoder för givarskötsel" på sid 31](#).

Desinficering eller sterilisering av TEE-givare sker antingen genom manuell blötläggning eller med en automatisk endoskopdesinfektor (AER). Andra steriliseringsmetoder (etylenoxid, gammastrålning eller autoklav) är förbjudna. Enheten måste rengöras ordentligt före desinficering eller sterilisering. Enzymrengöringsmedel är allmänt godkända och rekommenderas för effektiv rengöring.

TEE-givarens handtag och kontakt har inte någon patientkontakt och behöver inte samma desinficeringsnivå som det böjbara skaftet och den distala spetsen som har patientkontakt. Därför medföljer separata beskrivningar för desinficering/sterilisering av delar som har patientkontakt respektive de delar som inte har det. Det är viktigt att dessa instruktioner följs så att enheten håller så länge som möjligt.

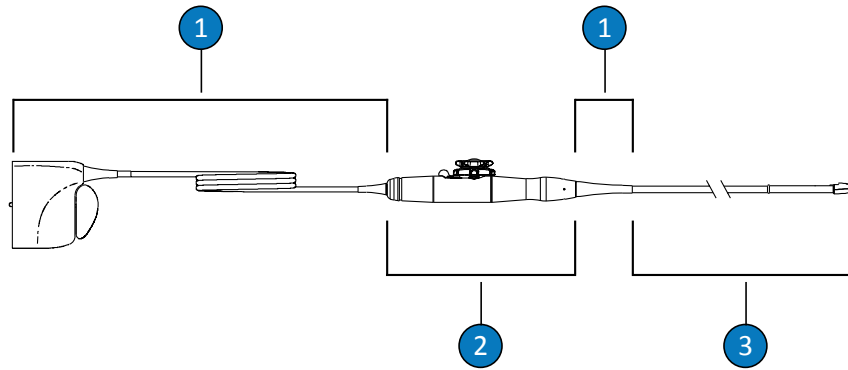


Delar på TEE-givare

1	C (kabel, kontakt och avlastare)
2	H (handtag och styrmekanism)
3	T (Givare: böjbart skaft och distal spets)

### Sammanfattning av delar som ska desinficeras på en TEE-givare

Följande bild visar en översikt över de delar som ska desinficeras på en TEE-givare. Hela proceduren finns i ["Rengöra och desinficera TEE-givare genom nedsänkning eller användning av automatisk endoskopdesinfektor"](#) på sid 81.

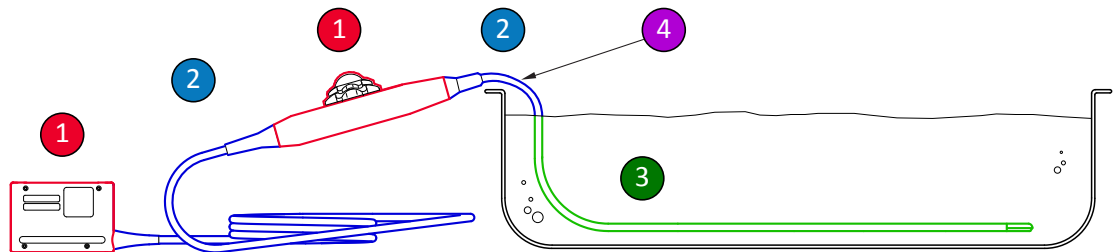

Delar som ska desinficeras på en TEE-givare

- 
- |         |  |
|---------|--|
| 1 och 2 | Spreja och torka av dessa delar av givaren med desinfektionsmedel som är kompatibla med de olika delarna. Se till att dessa delar inte sänks ned i vätska och att ingen vätska kommer in i någon oförseglad öppning. |
|---------|--|
- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | Om du vill använda alkohol är enbart utsidan på kontrollhöljet (handtaget) och kontakthöljet godkända för rengöring med 91 % isopropylalkohol eller 85 % denaturerad etylalkohol. Torka lätt med en dyna som är fuktad med alkoholen. Se till att dessa delar inte sänks ned i vätska och att ingen vätska kommer in i någon oförseglad öppning. |
|---|--|
- 
- |   |   |
|---|---|
| 3 | Endast det böjbara skaftet får sänkas ned eller sköljas. Lägg gastroskopet i blöt i den minimitid som rekommenderas av desinficeringsmedlets tillverkare. Sänk inte ned gastroskopet djupare eller under längre tid än vad som rekommenderas. |
|---|---|
- 
- |   |   |
|---|---|
| 4 | Sänk endast ned till denna punkt, inom 5 cm från kontaktens avlastare. Detta är maximalt tillåtet nedsänkingsdjup för kabeln – man måste inte sänka ned till denna punkt om det inte är nödvändigt. |
|---|---|
- 

## Riktlinjer för automatiska endoskopdesinfektorer

Endast några givare är kompatibla med en automatisk endoskopdesinfektor (AER) och AER:en kan endast användas med vissa lösningar.

TEE-givare från Philips kan desinficeras i en AER om följande villkor uppfylls:

- Alla kemikalier och processvillkor som används måste vara kompatibla med den specifika TEE-givaren från Philips som ska desinficeras, och kemikalierna måste användas i enlighet med de villkor som rekommenderas av den automatiska endoskopdesinfektorns tillverkare.
- Temperaturen får inte överskrida 45 °C (113 °F) under desinficeringen.
- TEE-givarens handtag och kontakt måste isoleras från rengörings- eller desinfektionsmedlet under hela desinficeringsprocessen, och detta gäller även handtagets stödstativ och förseglingar. Detta begränsar risken för att handtaget eller kontakten utsätts för stänk.
- Det är förbjudet att använda skydd i syfte att isolera handtaget och kontakten för att kunna sänka ned hela givaren i desinficeringsmedel under användningen av den automatiska endoskopdesinfektorn.
- Uppvärmade torkningsmetoder får inte användas.



Följande är exempel på AER-enheter som uppfyller desinficeringskraven för TEE-givare från Philips. Dessa AER-enheter är antingen specifikt utformade för eller har tillbehör som ger stöd för desinficering av TEE-givare.

**Exempel: AER-enheter som är kompatibla med TEE-givare från Philips**

Tillverkare	Ursprungsland	Modell	Typ av givare	Kompatibelt desinfektionsmedel	Process-temperatur
CIVCO Medical Solutions	US	Astra TEE	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Resert XL HLD	40 °C (104 °F)
CS Medical	US	TD-100	TEE	TD-5, TD-8	37 °C (98,6 °F)
Germitec	FR	Antigermix E1	TEE	--	UV-C
Medivators	US	Advantage Plus Endoscope Reprocessing System	TEE	Rapicide PA	30 °C (86 °F)
Soluscope	FR	Serie TEE	TEE	Soluscope P/Soluscope A, Proxy P/Proxy A	40 °C (104 °F)

**Rengöra och desinficera TEE-givare genom nedsänkning eller användning av automatisk endoskopdesinfektor**

Innan du genomför dessa procedurer ska du läsa varningarna och försiktighetsanmärkningarna i avsnittet ["Säkerhet"](#) och ["Varningar och försiktighetsåtgärder för TEE-givare"](#) på sid 70.

Tillämpa följande procedurer för rengöring och desinficering eller sterilisering av en TEE-givare:

- ["Rengöra TEE-givare, kontakt och handtag"](#) på sid 82
- ["Lågnivådesinficering av TEE-handtag och kontakter"](#) på sid 83

- ["Högnivådesinficering och sterilisering av TEE-givare \(flexibelt skaft och distal spets\)" på sid 84](#)

Börja med att välja de rengöringsmedel och desinfektions- eller steriliseringsmedel som är kompatibla med givarens olika delar. Använd rätt lösningsstyrka och se till att den tid lösningen är i kontakt med enheten är tillämplig för enhetens kliniska användning. Följ anvisningarna på tillverkarens etikett om beredning och lösningsstyrka. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder färdigblandade lösningar.

En lista över rengöringsmedel, desinfektionsmedel och steriliseringsmedel som är kompatibla med givaren finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

## Rengöra TEE-givare, kontakt och handtag

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Svamp som inte repar
  - Kompatibla rengöringsmedel för givaren, handtaget och kontakten (enzymrengöringsmedel rekommenderas)
  - Tråg för blötläggning och sköljning
  - Mjuk och torr duk som inte luddar
1. Ta fram ett blötläggningstråg och förbered ett rengöringsmedel som är kompatibelt med givaren (det böjbara skaftet och den distala spetsen) enligt den koncentration som angivits av tillverkaren.
  2. Rengör givaren genom att endast sänka ned det böjbara skaftet och den distala spetsen i rengöringslösningen och se till att skydda handtaget och kontakten. Sänk endast ned till denna punkt, inom 5 cm från kontaktens avlastare. Detta är maximalt tillåtet nedsänkingsdjup för det böjbara skaftet – du måste inte sänka ned det till denna punkt om det inte behövs.

Kontakten och handtaget får inte sänkas ned i rengöringslösningen. De här delarna är varken vattentäta eller stänkskyddade.

Rengör givaren försiktigt med en svamp som inte repar. Rengör linsen med en försiktigt avtorkande eller baddande rörelse.

3. Rengör handtaget och kontakten med kompatibla rengöringsmedel för respektive del och torka av dem försiktigt. Om givarens rengöringslösning är kompatibel med handtaget och kontakten kan du krama ut överflödigt vätska och försiktigt torka av dem.

Se till att det inte kommer in någon vätska i handtaget eller styrmekanismen, och inte heller i kontakten genom de elektriska kontaktstiften, avlastaren, kontakthöljet eller områdena runt låsspaksskaftet.

4. Låt inte givaren, handtaget och kontakten vara blötlagda i rengöringslösningen längre än den minimitid som krävs enligt rekommendationen från desinfektionsmedlets tillverkare.
5. Torka av kvarvarande rengöringslösning från kontakten och handtaget med en torr duk som inte luddar.
6. Ta upp givaren från rengöringslösningen och skölj den med varmt vatten för att avlägsna all rengöringslösning. Se till att inte skölja handtaget eller kontakten.
7. Kontrollera att givaren inte har rester av organiskt material. Om det finns rester tar du bort dem och rengör givaren på nytt.
8. Torka av givaren efter sköljningen med en mjuk och torr duk som inte luddar.

Handtaget och kontakten är nu förberedda för lågnivådesinficering med ett desinfektionsmedel på låg eller mellanhög nivå (LLD/ILD). Givaren är redo för högnivådesinficering med ett desinfektionsmedel på hög nivå (HLD) eller sterilisering med ett steriliseringsmedel (S).

## Lågnivådesinficering av TEE-handtag och kontakter

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- LLD/ILD-sprejer eller förindränkta servetter som är kompatibla med handtaget och kontakten
- Mjuka och torra dukar som inte luddar

1. Torka av handtaget och kontakten med lämpliga kompatibla servetter som är förindränkta med godkända LLD/ILD-medel. Om sprej används ska du spreja den på en trasa och sedan torka av handtaget och kontakten med den fuktiga trasan. Spreja inte desinfektionsmedel direkt på handtaget eller kontakten.

Se till att det inte kommer in någon vätska i handtaget eller styrmekanismen, och inte heller i kontakten genom de elektriska kontaktstiften, avlastaren, kontakthöljet eller områdena runt låspaksskaftet.

2. Följ tillverkarens riktlinjer gällande den tid som krävs för att desinficeringen ska ha rätt verkan.
3. Avlägsna desinfektionsmedelsrester från handtaget och kontakten med en mjuk och torr duk som inte luddar.

Nu är handtaget och kontakten desinficerade. Fortsätt med desinficering eller sterilisering av givaren.

## **Högnivådesinficering och sterilisering av TEE-givare (flexibelt skaft och distal spets)**

Rekommenderade förbrukningsartiklar:

- Kompatibelt högnivådesinfektionsmedel (HLD) eller steriliseringsmedel (S)
- Tråg för blötläggning och sköljning eller automatisk endoskopdesinfektor (AER)
- Mjuk och torr duk som inte luddar (för högnivådesinficering)
- Mjuk, torr och steril duk som inte luddar (för sterilisering)

### **ANM**

Automatiska endoskopdesinfektorer kan användas för desinficering. Se till att det valda protokollet omfattar en sköljcykel och ett torksteg.

1. Läs på desinfektionsmedlets eller steriliseringsmedlets etikett och bekräfta att det har rätt effekt och att lösningen inte har gått ut.
2. Förbered desinfektionsmedel eller steriliseringsmedlet i ett blötläggningstråg i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om du använder en AER ska du förbereda desinfektionsmedlet eller steriliseringsmedlet och programmera desinfektorn i enlighet med tillverkarens anvisningar.
3. Placera givaren i ett blötläggningstråg eller en AER och se till att kontakten och handtaget inte riskerar att utsättas för lösningen under processen. Lösningen får inte komma i kontakt med handtaget eller kontakten under vare sig desinficering eller sköljning.
4. Blötlägg eller behandla givaren under den tid som anges.
5. Om du har blötlagt givaren (inte använt en AER) ska du använda ett tråg och skölja givaren för att avlägsna rester av desinfektionsmedlet eller steriliseringsmedlet i enlighet med respektive tillverkarens riktlinjer.
6. Torka givaren med en mjuk och torr duk som inte luddar, eller en mjuk, torr och steril duk som inte luddar.
7. Kontrollera att givaren inte har skador som t ex sprickor, bristningar, vätskeläckor, skarpa kanter eller utskjutande delar. Vid synliga skador ska du sluta använda givaren och kontakta din Philips-representant.
8. Förvara givaren i ett välventilerat område med stöd för handtaget och kontakten som ska vara placerade ovanför givaren. Detta främjar torkningen och minskar risken för att eventuell kvarvarande lösning droppar ned på handtaget och kontakten från givaren.

TEE-givaren är nu desinficerad eller steril och klar för användning.

## Ultraljudsgel

För korrekt överföring av ljudstrålen använder du den ultraljudsgel som tillhandahålles eller rekommenderas av Philips eller något annat glykol-, glycerol- eller vattenbaserat akustiskt kopplingsmedium.

**VARNING**

Använd endast geltyperna **Sterile Aquasonic** eller **Sterile Ultraphonic**, som medföljer givarskyddet, vid intraoperativa procedurer.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte lotionbaserade produkter eller gel som innehåller mineralolja. Sådana produkter kan skada givaren och upphäver garantin.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte handsprit.

**FÖRSIKTIGHET**

Applicera inte givargelen förrän du är redo att utföra proceduren. Givare bör inte vara indränkta i gel under längre tid.

**FÖRSIKTIGHET**

De geler som anges här rekommenderas på grund av deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen.

Rekommenderade geler är bl.a:

- Aquasonic 100
- Aquasonic Clear
- Carbogel-ULT

- Scan

Om du vill ha ytterligare kompatibilitetsinformation kan du kontakta Philips på +1 800-722-9377 (Nordamerika) eller din lokala Philips-representant (utanför Nordamerika).





# 5 Förvaring och transport av givare

Använd tillämpliga riktlinjer för förvaring av givare vid transport samt daglig förvaring och långtidsförvaring.

## Transportera givare

Använda givare ska transporteras i en spillsäker, stängd behållare märkt med lämplig kontamineringsetikett. Se till att behållaren håller givaren på plats så att linsen inte skadas. Förhindra att delar som har patientkontakt kommer i kontakt med delar som inte har patientkontakt under transport.

Vid transport av rengjorda och desinficerade givare ska du se till att eventuella behållare som används för transport har rengjorts och desinficerats innan du placerar de rengjorda givarna i behållarna.

## Förvaring vid transport

Om en transportlåda ingår i din givarutrustning skall du alltid använda den för att transportera givaren från en plats till en annan. Följ dessa riktlinjer för att på rätt sätt förvara givaren för transport:

- Säkerställ att givaren är ren och desinficerad innan du lägger den i lådan. På så sätt håller du materialet rent, som flyttlådan är fodrad med.
- Placera givaren försiktigt i lådan så att du inte knäcker kabeln.
- Innan du stänger locket säkerställer du att ingen del av givaren sticker ut ur lådan.
- Linda in lådan i plastmaterial med förslutna luftfickor (t.ex. bubbelplast) och packa ned den inlindade lådan i en pappkartong.
- Det finns risk att skaftet eller styrmekanismen på TEE-givare skadas. Du bör därför undvika att böja eller linda givarens böjbara skaft i en cirkel på mindre än 30 cm i diameter.

## Daglig förvaring och långtidsförvaring

Följ dess riktlinjer för att skydda din givare:

- Förvara alltid givare i givarhållaren på systemets sida eller på en säkert monterad väggställning, när du inte använder dem.
- Kontrollera att givarhållaren är ren innan du placerar givaren där (se avsnitt "[Rengöring och underhåll av systemet](#)").
- När du förvarar givare, använd särskilda kabelklämmor för att skydda givarkabeln, om sådana finns tillgängliga.
- Undvik att förvara givare i extrema temperaturer eller i direkt solljus.
- Förvara givare separat från andra instrument för att undvika oavsiktliga skador.
- Innan du förvarar givare säkerställer du att de är helt torra.
- På TEE-givare kontrollerar du att distalspetsen är rak och skyddad innan du förvarar givaren.
- Förvara aldrig en TEE-givare i flyttlådan, utom vid transport.

## 6 Desinfektionsmedel för system och givare

Läs denna information innan du desinficerar eller steriliserar. Den behandlar rekommenderade desinfektionsmedel och valet av rätt desinfektionsmedel för önskad desinficeringnivå. Du måste se tillämplig kompatibilitetstabell för desinfektionsmedel och rengöringslösningar när det gäller kemisk kompatibilitet mellan desinfektionsmedel/rengöringsmedel och ultraljudsgivare från Philips (se *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare*).

### Om desinfektionsmedel



#### VARNING

Vissa typer av desinfektionsmedel avlägsnar inte alla slags föroreningar på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att rätt typ av desinfektionsmedel används för systemet eller givaren i fråga och att lösningens styrka och kontakttid passar för avsedd klinisk användning.



#### VARNING

Desinfektionsmedlen rekommenderas för deras kemiska kompatibilitet med produktmaterialen, inte för deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**VARNING**

Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

**VARNING**

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid rengöring, desinficering eller sterilisering av utrustning.

**VARNING**

Vilken desinfektionsnivå en enhet behöver beror på vilken typ av vävnad den är i kontakt med under användningen och typen av givare som används. Säkerställ att desinfektionsmedlets typ passar för givaren i fråga och givarens användningsområde. För information om desinficeringskravens nivåer, se ["Metoder för givarskötsel"](#) på sid 31. Se även instruktioner på desinfektionsmedlets förpackning och rekommendationer från APIC (förbundet för praktiserande läkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska läkemedelsverket) och CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet).

**FÖRSIKTIGHET**

Användning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel lösningsstyrka samt djupare eller mer långvarig nedsänkning än vad som rekommenderas kan skada eller missfärga givaren. Givarens garanti blir därtill ogiltig.



### FÖRSIKTIGHET

Användning av isopropylalkohol (tvättspirit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade produkter på alla givare bör begränsas. På givare med USB-anslutningar är de enda delarna som kan rengöras med alkohol givarhöljet och linsen (det akustiska fönstret). På givare som inte är TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och givarhöljet och linsen. På TEE-givare är de enda delarna som kan rengöras med alkohol kontakthöljet och kontrollhöljet. Se till att lösningen innehåller max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av någon annan del av givaren med alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada dessa delar av givaren. En sådan skada täcks inte av garantin eller servicekontraktet.

## Faktorer som påverkar desinfektionsmedlets effekt

Följande faktorer påverkar desinfektionsmedlets effekt:

- Mikroorganismernas antal och plats
- Mikroorganismernas inneboende resistens
- Desinfektionsmedlens koncentration och styrka
- Fysiska och kemiska faktorer
- Organisk och oorganisk materia
- Exponeringstiden
- Biofilmer

## Välja desinfektionsmedel och rengöringslösningar

Information om val av desinfektions- och rengöringsmedel som är kompatibla med ultraljudssystemet och givarna från Philips finns i *Desinfektionsmedel och rengöringslösningar för ultraljudssystem och givare* som medföljer systemdokumentationen, eller på webbsidan för skötsel av givare och system:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Följ anvisningarna på etiketten om beredning och lösningsstyrka. Var noga med att kontrollera lösningens utgångsdatum om du använder en färdigblandad lösning.

På grund av det stora antalet tillgängliga rengörings- och desinfektionsprodukter är det omöjligt att göra en lista som omfattar samtliga. Kontakta din Philips-representant för hjälp om du är osäker på om en viss produkt är lämplig.

För mer information:

- [www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)
- Ring Philips på +1 800-722-9377 i Nordamerika.
- Utanför Nordamerika kontaktar du din lokala Philips-representant.

Baserat på materialkompatibilitetstestning, produktanvändningsprofil och aktiva ingredienser har Philips gett ett allmänt godkännande för följande typer av *lågnivådesinfektionsmedel* för användning som spray eller på servett på givare med hudkontakt och transvaginala eller transrektala givare, enligt kompatibilitetsbegränsningarna i tabellen med desinfektionsmedel. Detta godkännande gäller inte transesophageala givare eller laparoskopigivare.

- Natriumhypokloritbaserade medel (exempelvis 10 % hushållsblekmedelslösning med cirka 0,6 % aktivt natriumhypoklorit)
- Kvartärammoniumbaserade medel (QUAT) (exempelvis produkter som innehåller n-alkylbenzylammoniumkloridlösning, där x kan vara vilken organisk funktionell grupp som helst, t.ex. etyl och metyl och så vidare. Koncentrationen vid användning ska vara lägre än 0,8 % totalt för alla angivna kvartärammoniumbaserade medel)
- Accelererad väteperoxid-baserat (max 0,5 % väteperoxid)
- Medel baserade på alkohol eller alkohol plus QUAT (produktens alkoholhalt får inte överskrida 91 % isopropylalkohol eller 85 % denaturerad etylalkohol)
- Du kan också använda produkter som inte specifikt anges i denna kompatibilitetstabell, men som har liknande aktiva ingredienser (enligt denna lista) och marknadsförs för medicinskt bruk.



[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)



Philips Ultrasound, Inc.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021-8431  
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 4-6  
5684 PC Best  
The Netherlands

CE 0086



© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Samtliga rättigheter förbehålles. Detta material får inte mångfaldigas eller spridas, varken helt eller delvis och inte i någon form, oavsett om det sker elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, såvida inte skriftligt tillstånd erhållits från upphovsrättsinnehavaren.

Publicerad i USA  
4535 619 59571\_A/795 \* MAR 2018 - sv-SE