


Jak korzystać ze sprężarkowego systemu nebulizacji


Nebulizator zmienia płynny lek w aerozol, który podczas wdechu dociera głęboko do twoich płuc. Tucker używa nebulizatora, gdy jest w domu ze swoją przyjaciółką, foczką Sami. Pamiętaj, żeby podczas czyszczenia i używania nebulizatora korzystać z pomocy osoby dorosłej.

Przygotowanie


- 1** Postaw sprężarkę na stole.

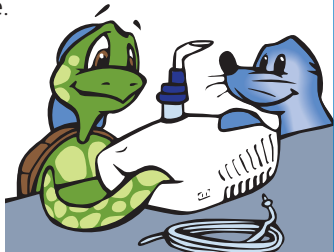

- 2** Podłącz sprężarkę do gniazdka.

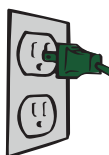

- 3** Jeden koniec przewodu powietrza połącz z pojemnikiem na lek, a drugi ze sprężarką.

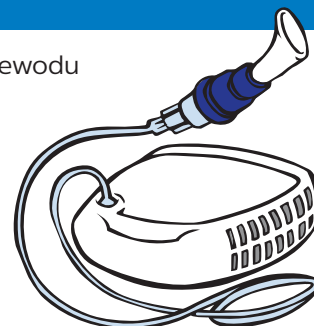


Przyjmowanie leku

- 4** Nalej lek do pojemniczki.




- 5** Włącz sprężarkę i sprawdź, czy z ustnika wydobywa się mgiełka.

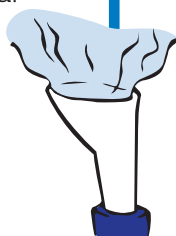

- 6** Usiądź prosto. Włóż ustnik do ust i powoli wdychaj i wydychaj powietrze. Jeśli używasz maski twarzowej, możesz wykonywać wdechy i wydechy w podobny sposób.



- 7** Gdy nebulizator zacznie wydawać dźwięk przypominający bulgotanie, oznacza to, że twoja inhalacja dobiegła końca. Wyłącz sprężarkę.

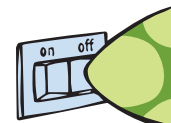

Czyszczenie sprężarki

- 1** Przed czyszczeniem sprężarki wyjmij wtyczkę z gniazdka.

- 2** Raz w tygodniu sprawdzaj stan filtra i jeśli jest zabrudzony, wymień go na nowy.




- 3** Raz w miesiącu przetrzyj obudowę sprężarki wilgotną ściereczką.



- 4** Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.

Czyszczenie nebulizatora

- 1** Po każdym użyciu odłącz przewód powietrza i rozmontuj nebulizator.

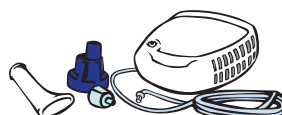

- 2** Elementy nebulizatora myj ciepłą wodą z mydłem.

- 3** Przeplucz czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Jeżeli masz nebulizator wielokrotnego użytku (w kolorze jasnoniebieskim)

– Raz w tygodniu gotuj przez 10 minut wszystkie jego części (z wyjątkiem maski i przewodu powietrza) w wodzie z dodatkiem 2-3 kropli płynu do mycia naczyń.



**Philips Healthcare jest częścią
Royal Philips Electronics**

Kontakt

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azja
+49 7031 463 2254

Europa, Bliski Wschód, Afryka
+49 7031 463 2254

Ameryka Łacińska
+55 11 2125 0744

Ameryka Północna
+1 425 487 7000
800 285 5585 (numer bezpłatny,
wyłącznie w Stanach
Zjednoczonych)

Obsługa Klienta
+1 724 387 4000
800 345 6443 (numer bezpłatny,
wyłącznie w Stanach Zjednoczonych)

Siedziba główna Philips Respironics
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Azja-Pacyfik
+65 6882 5282

Philips Home Healthcare Solutions
Australia
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488 (numer bezpłatny,
wyłącznie w Australii)

Philips Respironics Chiny
+86 021 24127311

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francja
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Włochy
+39 039 203 1

Philips Respironics Szwecja
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Szwajcaria
+41 6 27 45 17 50


Philips Respironics Wielka Brytania
+44 800 1300 845

Respironics New Jersey. Inc.
5 Wood Hollow Road

Parsippany, NJ 07054 USA

www.philips.com/respironics

Respironics, Foczek Sami (Sami the Seal) i żółwik Tucker (Tucker the Turtle) to znaki towarowe należące do spółki Koninklijke Philips Electronics N.V. i jej podmiotów zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

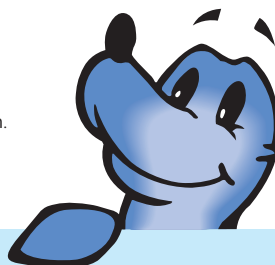

Więcej informacji na stronie www.philips.pl/astma.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacjach i/lub wycofania wyrobu w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez zobowiązań, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszej publikacji.

MCI 4104948 1101465 DD JUL 2012