


Kako koristiti kompresorski inhalator s raspršivačem


Raspršivač pretvara tekući lijek u aerosol kako bi ga mogli duboko udahnuti. Nina upotrebljava svoj raspršivač kad je kod kuće sa Samijem. Neka vam odrasla osoba pomogne pri upotrebi i čišćenju raspršivača.

Pripremite se za inhalaciju

- 1** Stavite kompresor na stol.

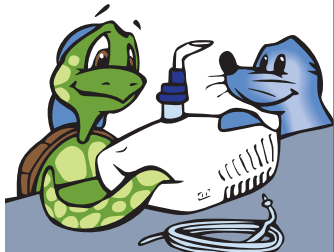

- 2** Uključite kompresor u električnu utičnicu.

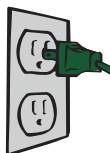

- 3** Spojite cijev raspršivača s jedne strane na posudicu za lijek, a s druge strane na kompresor.




Započnite inhalaciju


- 4** Dodajte lijek u posudicu za lijek.




- 5** Uključite kompresor i provjerite pojavljuje li se maglica iz nastavka za usta.

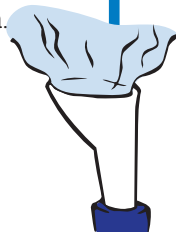

- 6** Sjednite uspravno. Stavite nastavak za usta i polako udišite i izdišite. Ako upotrebljavate masku, na isti način udišite i izdišite.

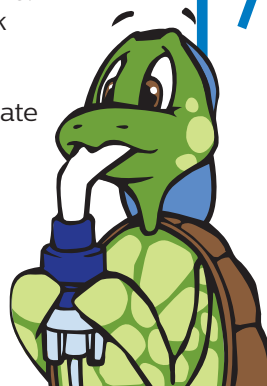

- 7** Kad raspršivač počne ispuštati zvuk prskanja, terapija je dovršena. Isključite kompresor.

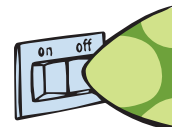


Čišćenje kompresora

- 1** Isključite kompresor iz struje prije čišćenja.

- 2** Provjerite filter jednom tjedno i zamijenite ga ukoliko je prljav.



- 3** Obrišite kompresor vlažnom tkaninom jednom mjesečno.

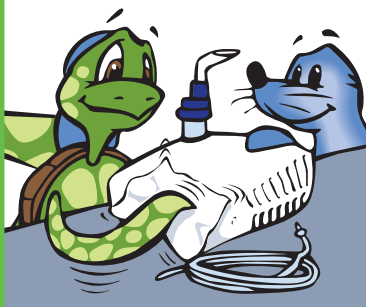

- 4** Čuvati na suhom i sigurnom mjestu.

Čišćenje raspršivača

- 1** Nakon svakog korištenja odspojite cijev raspršivača i rastavite njegove dijelove.



- 2** Operite sve dijelove raspršivača toplom sapunastom vodom.

- 3** Isperite čistom vodom i ostavite neka se osuše na zraku.

Ako imate raspršivač za višekratnu uporabu (svjetloplavi)

– Jednom tjedno prokuhajte na 10-ak minuta sve dijelove raspršivača (osim cijevi i maske) u vodi s 2-3 kapi deterdženta.



**Philips Healthcare dio je tvrtke
Royal Philips Electronics**

Obratite nam se

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azija
+49 7031 463 2254

Europa, Bliski istok i Afrika
+49 7031 463 2254

Latinska Amerika
+55 11 2125 0744

Sjeverna Amerika
+1 425 487 7000
800 285 5585
(besplatan broj, samo u SAD-u)

Služba za korisnike
+1 724 387 4000
800 345 6443
(besplatan broj, samo u SAD-u)

Međunarodni ured tvrtke Philips
Respironics
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Azija i Pacifik
+65 6882 5282

Philips Home Healthcare Solutions
Australija
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488
(besplatan broj, samo u Australiji)

Philips Respironics Kina
+86 021 24127311

Philips Respironics Njemačka
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francuska
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italija
+39 039 203 1

Philips Respironics Švedska
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Švicarska
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Ujedinjeno
Kraljevstvo
+44 800 1300 845

Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 SAD

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal i Tucker the Turtle žigovi su tvrtke
Koninklijke Philips Electronics N.V. i njoj pridruženih tvrtki.
Sva prava pridržana.



Posjetite www.philips.com/asthma kako biste saznali više



© 2012. Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.

Tvrtka Philips Healthcare pridržava pravo izmjene specifikacija i/ili prestanka proizvodnje proizvoda u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti ili obveze te neće biti odgovorna ni za kakve posljedice nastale upotrebom ovog dokumenta.

MCI 4104315 1102456 DD JUL 2012