



Produkte und Dienstleistungen für maximale Leistung

Philips HeartStart HS1 Defibrillator Zubehör und Verbrauchsmaterial

PHILIPS

Tragetaschen

Für den HeartStart HS1 Defibrillator stehen drei Tragetaschen zur Auswahl: die Standard-Tragetasche, die schmale Tragetasche und der wasserdichte Hartschalenkoffer. Die Standard-Tragetasche und die schmale Tragetasche bestehen aus halbhartem Material und sind mit strapazierfähigem rotem Cordura® überzogen. Beide Taschen verfügen über ein Sichtfenster, in dem die Kurzanleitung aufbewahrt werden kann.



Standard-Tragetasche

Produktnummer M5075A

Neben dem HeartStart HS1 finden in der Standard-Tragetasche eine Kassette mit Ersatz-Pads und eine Ersatzbatterie Platz. Zudem ist eine Verbandschere enthalten.

Abmessungen:

24 x 21 x 12 cm (B x H x T)



Schmale Tragetasche

Produktnummer M5076A

Die schmale Tragetasche (M5076A) enthält den HeartStart HS1 und eine Verbandschere.

Abmessungen:

24 x 21 x 9 cm (B x H x T)



Hartschalenkoffer

Produktnummer YC

Der wasserdichte Koffer aus Hartschalenkunststoff eignet sich für den Einsatz unter hohen Belastungen, wie z.B. im Freien bei Nässe. Auch eine Ersatzbatterie, eine Kassette mit Ersatz-Pads und der Inhalt des Notfall-Sets finden in diesem Koffer Platz.

Abmessungen:

34 x 30 x 15 cm (B x H x T)

Wandhalterungen

Mit Philips Wandhalterungen und Defibrillatorschränken können Defibrillatoren strategisch so positioniert werden, dass sie im Notfall schnell zugänglich sind.



Wandhalterung

Produktnummer 989803170891

Die Wandhalterung wurde speziell für Philips HeartStart Defibrillatoren und das entsprechende Zubehör entwickelt. Die Defibrillatortasche wird in die Wandhalterung eingesetzt und mit einem Sicherheitsband (M3859A) gegen Missbrauch gesichert. Ein durchtrenntes Sicherheitsband weist darauf hin, dass der Defibrillator aus der Wandhalterung entnommen wurde und das Defibrillator-Zubehör eventuell ergänzt werden muss. Das Notfall-Set (68-PCHAT) lässt sich einfach hinter der Defibrillatortasche verstauen.

Abmessungen:


27 x 20 x 17 cm (B x H x T)

Gewicht: 0,52 kg



Sicherheitsband für Wandhalterung

Produktnummer M3859A

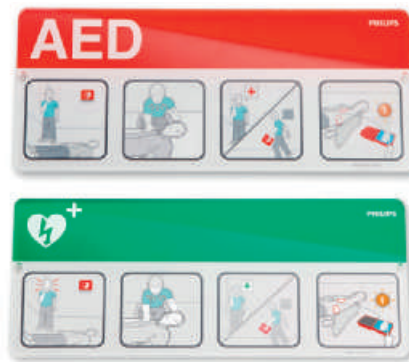

AED-Schilder


Produktnummer 989803170901 (rot)

Produktnummer 989803170911 (grün/DIN)

Durch das Anbringen eines AED-Schildes über jedem öffentlich zugänglichen AED wird die Aufmerksamkeit auf den AED gelenkt. Durch leicht verständliche Bilder werden Passanten darauf aufmerksam gemacht, wie ein AED im Notfall zu verwenden ist. Diese Schilder sind hervorragend geeignet für Bürogebäude, Sportvereine, öffentliche Einrichtungen, Schulen u.a.

Abmessungen:

26 x 11 cm (B x H)

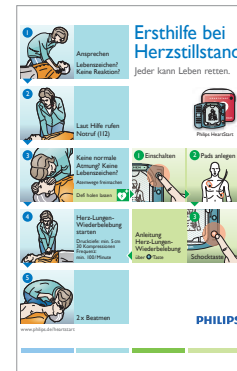

AED-Poster

Bitte wenden Sie sich an Ihren Philips Vertriebspartner.

Das Poster bietet Ihnen eine Übersicht der wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen und zeigt auch den Einsatz eines Defibrillators. Sie können es neben einem Defibrillator anbringen, aber auch in Bereichen, in denen kein AED vorhanden ist, wie z.B. in Pausen- oder Umkleieräumen. So können sich Mitarbeiter oder andere Personen jederzeit die Notfall-Maßnahmen ansehen und verinnerlichen.



AED-Hinweisschilder

Produktnummer 989803170921 (rot)

Produktnummer 989803170931 (grün/DIN)

Mit einem AED-Hinweisschild über der Wandhalterung oder dem Defibrillatorschrank wird der Defibrillator noch besser wahrgenommen. Das Schild kann zur Optimierung der Sichtbarkeit auf drei verschiedene Arten angebracht werden: T-förmig, V-förmig oder an Ecken.

Abmessungen der Ansichtsfäche:

23 x 15 cm (H x B)

Wandschränke

Zur schnelleren Verständigung des Rettungsdienstes und der Verhinderung von Diebstahl bietet Philips drei verschiedene batteriebetriebene, alarmgesicherte Wandschränke. Das Basis-Schrankmodell verfügt über einen einfachen akustischen Alarm. Ebenfalls erhältlich sind zwei Premium-Schrankmodelle: Ein Geräteschrank für die Wandmontage und ein Einbau-Geräteschrank, der in einer Aussparung in der Wand für eine dezentere Optik angebracht wird. Die Premium-Schrankmodelle verfügen über eine Kombination aus akustischem Alarm und blinkendem Alarm. Sie sind aus robustem, dickem Stahlblech gefertigt und bieten ausreichend Stauraum für optionales Zubehör. Der Alarm der Premium-Schrankmodelle kann außerdem mit Ihrem internen Sicherheitssystem verbunden werden, um eine koordiniertere Reaktion auf Notfälle zu ermöglichen.



**Geräteschrank für die
Wandmontage, Basismodell**
Produktnummer 989803136531

Abmessungen:
42 x 38 x 15 cm (B x H x T)



**Geräteschrank für die
Wandmontage, Premiummodell**
Produktnummer PFE7024D

Abmessungen:
41 x 57 x 15 cm (B x H x T)



**Einbau-Geräteschrank,
Premiummodell**
Produktnummer PFE7023D

Abmessungen:
In die Wand eingelassener Teil des Schanks
36 x 56 x 15 cm (B x H x T)

Auf der Wand befindlicher Teil des Schanks
42 x 62 x 6 cm (B x H x T)

Elektrodenkassetten mit SMART Pads



Elektrodenkassette mit SMART Pads für Erwachsene

Produktnummer M5071A

HeartStart SMART Pads für Erwachsene eignen sich für Patienten mit einem Gewicht ab 25 kg.




Elektrodenkassette mit SMART Pads für Kinder

Produktnummer M5072A

SMART Pads für Kinder eignen sich für Kinder und Kleinkinder unter 8 Jahren oder mit einem Körpergewicht von unter 25 kg. Diese speziellen Pads reduzieren die Therapieenergie des Defibrillators automatisch auf eine für Kinder angemessene Dosis von 50 Joule (J).^{1,2} Die Elektrodenkassette für Kinder ist durch ein Teddybär-Symbol und die zusätzlichen Angaben zum Gewicht und Alter einfach zu erkennen.

1. Tang, et al. Pediatric Fixed Energy Biphasic Waveform Defibrillation Using a Standard AED and Special Pediatric Electrodes. Supplement to Circulation, Vol 102, No 18, October 31, 2000, II-437.
2. Cecchin, et al. Is Arrhythmia Detection by Automatic External Defibrillator Accurate for Children? Sensitivity and Specificity of an AED Algorithm in 696 Pediatric Arrhythmias. Circulation 2001; 103:2483-2488, May 22, 2001.

Weiteres Zubehör

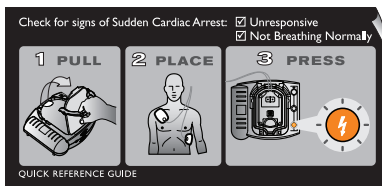

Kurzanleitung

Produktnummer M5066-97800

Die Kurzanleitung bietet eine kurze Übersicht für die Anwender des Defibrillators. Einfache Abbildungen vermitteln schnell die einzelnen Schritte der Bedienung.



Notfall-Set

Produktnummer 68-PCHAT

Das Notfall-Set beinhaltet Hilfsmittel, die typischerweise für die Patientenversorgung und den Schutz des Ersthelfers benötigt werden: 2 Paar hypoallergene Nitrilhandschuhe, eine Taschenlampe, eine Verbandschere, einen Rasierer (zum Entfernen der Brusthaare) und ein großes, besonders saugfähiges Papiertuch. Diese Gegenstände befinden sich in einem Reißverschlussbeutel, der am Griff der Tasche befestigt werden kann.

Abmessungen:

24 x 14 cm (B x H)



Langlebige Batterie

Produktnummer M5070A

Der HeartStart HS1 wird mit einer langlebigen Lithium-Mangandioxid-Batterie betrieben, deren Lebensdauer in der Lagerung fünf Jahre beträgt. Nach Installation hält die Batterie im Standby-Betrieb in der Regel vier Jahre. Für Defibrillatoren, die regelmäßig für Schulungen und/oder Vorführungen genutzt werden, sollten zusätzliche Batterien oder ein Trainingsgerät verwendet werden.

Schulungszubehör



Elektrodenkassetten für Schulungszwecke

Produktnummer M5073A (Erwachsene)

Produktnummer M5074A (Kinder)

Elektrodenkassetten für Schulungszwecke für Erwachsene und Kinder ermöglichen Trainingsszenarien sowohl mit dem HeartStart HS1 als auch mit dem HeartStart HS1 Trainer. Durch Einsetzen der Schulungskassette in den HS1 wird die Schockabgabe blockiert und der Trainingsmodus aktiviert. Dieser Schulungsmodus bietet acht verschiedene Notfallszenarien. Der Defibrillator erteilt je nach verwendeter Elektrodenkassette (Erwachsene oder Kinder) die passenden Sprachanweisungen, einschließlich Anleitungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW).

Jede Elektrodenkassette für Schulungszwecke besteht aus einer abnehmbaren durchsichtigen Schutzabdeckung mit Griff, einer wiederverschließbaren Schutzhülle und einem Paar wiederverwendbarer selbsthaftender Pads.* Im Lieferumfang enthalten sind außerdem eine Anleitung zur Pads-Platzierung (entweder für Erwachsene oder für Kinder), illustrierte Anweisungen zur Installation der Elektrodenkassette (unter Verwendung der Anleitung zur Pads-Platzierung) und Wiederverpackung der Kassette nach der Verwendung. Die Elektrodenkassette für Schulungszwecke kann nach Anschluss an einen internen (M5088A) oder externen (M5089A) Übungspuppenadapter auch mit einer Übungspuppe verwendet werden.



HeartStart Trainer

Produktnummer M5085A

Für Gruppenschulungen ist der Philips HeartStart Trainer eine flexible und wirtschaftliche Lösung. Der HeartStart Trainer unterstützt Ersthelfer beim Erlernen der Bedienung des HeartStart HS1. Der Trainer verwendet dieselben Sprachanweisungen wie der HeartStart Defibrillator und bietet acht vorkonfigurierte Szenarien zur Simulation realistischer Situationen, wie sie die Ersthelfer antreffen können.

Im Lieferumfang des HeartStart Trainers sind eine Nylontragetasche, eine wiederverwendbare Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Erwachsene, M5073A) und ein externer Übungspuppenadapter enthalten. Zum optionalen Zubehör gehören der interne Übungspuppenadapter (M5088A) für ausgewählte Übungspuppen, 10 externe Übungspuppenadapter (M5089A) für alle Übungspuppen, eine Anleitung zur Pads-Platzierung bei Erwachsenen (M5090A) und die Elektrodenkassette für Schulungszwecke (Kinder, M5074A).

Schulungsset für Übungsleiter (englisch)

Produktnummer M5066-89100

Das Schulungsset für Übungsleiter beinhaltet verschiedene Schulungsmaterialien wie Videos oder Präsentationen. Diese eignen sich besonders für größere Gruppen, die in der Bedienung des HeartStart HS1 unterwiesen werden. Die Materialien sind nur in englischer Sprache verfügbar.

* Ersatzelektrodenkassetten für Schulungszwecke: Erwachsene (M5093A) und Kinder (M5094A).

Datenmanagement

Philips bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur effizienten und effektiven Konfiguration der HeartStart Defibrillatoren, zum anschließenden Herunterladen, Übertragen, Freigeben und Analysieren der Reanimationsdaten sowie zur Berichterstellung. Mit diesem Datenmaterial kann der ärztliche Leiter die Notfalleinsätze besser abstimmen. Mit der Event Review Software können die Defibrillatordaten effizient verwaltet werden – egal, ob Sie ein kommunales Programm für öffentlich zugängliche Defibrillatoren, ein AED-Programm in einer Schule, das Notfallteam in einem Unternehmen, ein Rettungsteam oder das Reanimationsteam Ihres Krankenhauses leiten.

HeartStart Event Review Express

Unser einfachstes Datenmanagement-Produkt für einen schnellen Blick auf Defibrillator-Daten: Mit Event Review Express können EKG-Daten von einem Defibrillator heruntergeladen sowie angezeigt und gedruckt werden. Eine Testversion des Programms steht kostenlos auf der Philips Datenmanagement-Webseite zur Verfügung.

(www.medical.philips.com/goto/eventreview)



HeartStart Data Messenger

Produktnummer 861451 Opt. A01

Mit dem HeartStart Data Messenger können Ereignisdaten vom Defibrillator schnell und einfach dorthin übertragen werden, wo sie benötigt werden. Der Data Messenger eignet sich besonders für Feuerwehren und Rettungsdienste, um Ereignisdaten direkt vom Defibrillator herunterzuladen und zeitnah dem behandelnden medizinischen Personal in Kliniken zur Verfügung zu stellen. Der Data Messenger kann so konfiguriert werden, dass er automatisch im Hintergrund ausgeführt wird. Er kann aber auch als einfacher Assistent konfiguriert werden, der den Anwender Schritt für Schritt durch das Herunterladen, Anzeigen und Weiterleiten der Ereignisdaten führt. Der HeartStart Data Messenger kann auf einem PC oder Smartphone ausgeführt werden.

HeartStart Event Review

Produktnummer 861489 Option A01 –

Einzelplatzlizenz

oder 861489 Option A02 – Unternehmenslizenz

Event Review ermöglicht das Herunterladen von Patientendaten von einem Defibrillator, Anzeigen auf dem PC-Bildschirm, Einfügen von Kommentaren und die Eingabe von Informationen zur Ersten Hilfe oder zum Patientenzustand. Sie können den Fall in einer Datei oder Datenbank speichern und somit Ad-hoc-Fallabfragen durchführen oder Fallberichte erstellen. Außerdem ist der HeartStart HS1 mit Event Review konfigurierbar.* Die Software ist mit Einzelplatz- oder unbeschränkter Unternehmenslizenz erhältlich.

HeartStart Event Review Pro

Produktnummer 861431 Option A01 –

Einzelplatzlizenz

Produktnummer 861431 Option A03 –

Standortlizenz

Event Review Pro ist unser umfangreiches Fallmanagement-Tool für Datenverwalter und medizinische Leiter mit hohen Anforderungen. Es bietet noch detailliertere Eingabeformulare, damit jeder Aspekt der Ereignisse festgehalten werden kann, z.B. detaillierte Reaktionszeiten, Eingriffe und Beobachtungen. Neben den einzelnen Fallberichten erhalten Sie Utstein-Berichte und grafische Darstellungen der Gesamtreaktionszeiten, damit Sie Ihre Leistungen noch effizienter verwalten können.



Infrarotdatenkabel

Produktnummer ACT-IR

Wenn das Infrarotdatenkabel an einen PC angeschlossen ist, auf dem HeartStart Data Messenger, Event Review Express, Event Review, Event Review Pro oder Configure ausgeführt wird, kann darüber eine Verbindung zum HS1 Defibrillator hergestellt werden. So können Sie die Einstellungen des Defibrillators verändern oder Ereignisdaten speichern, anzeigen und für die Berichterstellung herunterladen.

HeartStart Configure

Produktnummer 861487

Mit HeartStart Configure können die Einstellungen des FR3, FRx oder HS1 überprüft und geändert werden. Sie können die aktuellen Einstellungen des Defibrillators abrufen, diese auf die Standardvorgaben zurücksetzen oder einzelne Einstellungen gemäß den Anforderungen des medizinischen Leiters anpassen und auf den Defibrillator übertragen.* Zur effizienteren Verwaltung der Konfiguration von mehreren Defibrillatoren können die Werte in einer Datei gespeichert werden. Somit können Sie dieselben Einstellungen auf alle Ihre AEDs übertragen und die zulässigen Einstellungen protokollieren.

* Standardvorgaben dürfen nur von befugten Personen geändert werden. Für die gewerbliche Nutzung ist eine Ersteinweisung durch autorisierte Personen vor Ort gesetzlich erforderlich.

Für die gewerbliche Nutzung ist eine
Ersteinweisung durch autorisierte Personen
vor Ort gesetzlich erforderlich

Besuchen Sie uns unter www.philips.de/heartstart



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu
verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung
einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics.

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 61643 * SEP 2013

HeartStart Defibrillatoren
+1 978 659 3332
800 263 3342
(gebührenfrei, nur USA)